

TR WM110TD ve WM120TD tipi cihazlara uygun hastalar için kullanma talimatı



prisma VENT30
prisma VENT30-C
prisma VENT40
prisma VENT40-C
prisma VENT50
prisma VENT50-C

LÖWENSTEIN
medical

Solunum cihazları

İçindekiler

1 Giriş	5
1.1 Kullanım amacı	5
1.2 İşlevin tarifi	5
1.3 Uygulayıcı nitelikleri	6
1.4 Endikasyonlar	6
1.5 Kontrendikasyonlar	6
1.6 Yan etkiler	7
1.7 Kliniksel fayda	7
2 Güvenlik	9
2.1 Güvenlik bilgi ve uyarıları	9
2.2 Genel bilgiler	10
2.3 Bu dokümandaki ikaz bilgileri	11
3 Ürünün tarifi	12
3.1 Genel bakış prisma VENT30, prisma VENT30-C, prisma VENT40, prisma VENT40-C	12
3.2 Genel bakış prisma VENT50, prisma VENT50-C	13
3.3 Çalışma konumları	14
3.4 Kumanda paneli	14
3.5 Ekrandaki semboller	15

4 Hazırlık ve kullanım	17
4.1 Cihazın Konumlandırılması	17
4.2 Hortum sisteminin bağlanması	18
4.3 İlk kez kullanmadan önce	22
4.4 Terapinin başlatılması	23
4.5 Terapinin sona erdirilmesi / Cihazın kapatılması	23
4.6 Solunum havası nemlendiricisinin ayarlanması	24
4.7 Ön konfigürasyonlu programın seçilmesi	24
4.8 LIAM (sadece prisma VENT50, prisma VENT50-C)	25
4.9 softSTART işlevinin açılması ve kapatılması	25
4.10 SD kartının (seçmeli) kullanılması	26
4.11 Akünün (seçmeli) kullanılması	26
5 Menü maddelerindeki ayarlamalar	28
5.1 Cihaz dâhilinde gezinmek	28
5.2 Hasta menüsü	29
6 Hijyenik hazırlama	33
6.1 Genel bilgiler	33
6.2 Süreler	33
6.3 Cihazın hijyenik hazırlanması	34
6.4 Hava filtresinin (gri filtre) temizlenmesi	36
6.5 Polen filtresinin (beyaz filtre) değiştirilmesi	36
6.6 İşlev kontrolü	36
7 Alarmlar ve arızalar	38
7.1 Uyarıların gösterilme sıralaması	38
7.2 Fizyolojik alarmların devre dışı bırakılması	38
7.3 Uyarıların sessiz konuma alınması	39
7.4 Fizyolojik alarmlar	39
7.5 Teknik uyarılar	41
7.6 Arızalar	46
8 Bakım	47
8.1 Güvenlik bilgi ve uyarıları	47
8.2 Genel bilgiler	47

9 Taşıma ve depolama	47
10 Giderilmesi ya da imha edilmesi	48
11 Ek	49
11.1 Teknik veriler	49
11.2 Elektromanyetik girişimler	56
11.3 Elektromanyetik bağışıklık	57
11.4 ME cihazları ve ME sistemleri için elektromanyetik bağışıklık	59
11.5 Tanımlar, işaretler ve semboller	60
11.6 Teslimat kapsamı	62
11.7 Aksesuarlar ve yedek parçalar	62
11.8 Garanti	64
11.9 Uygunluk beyanı	64

1 Giriş

1.1 Kullanım amacı

WM110TD

(prisma VENT30, prisma VENT30-C, prisma VENT40, prisma VENT40-C)

Cihaz WM110TD, kendi solunum refleksine sahip hastaların solunumu için tasarlanmıştır. Bu cihaz, 10 kg'dan ağır olan ve ventilasyon yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir. Hem sabit, hem de mobil kullanılabilmesi gibi, hem evsel ortamlarda, hem de klinik alanlarda kullanılabilir.

WM120TD

(prisma VENT50, prisma VENT50-C)

Cihaz WM120TD, kendi solunum refleksine sahip hastaların solunumu için tasarlanmıştır. Bu cihaz, 10 kg'dan ağır olan ve ventilasyon yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir. Hem sabit, hem de mobil kullanılabilmesi gibi, hem evsel ortamlarda, hem de klinik alanlarda kullanılabilir.

1.2 İşlevin tarifi

Bu cihaz hem girişimsel olmayan, hem de girişimsel olan solutma girişleri ile kullanılabilir.

Fan, bir filtre üzerinden ortam havasını emer, terapi basıncı sağlayarak hortum sistemi ve soluma girişi üzerinden bu havayı hastaya ulaştırır. Kaydedilen basınç ve akış sensörleri sinyallerine göre, bu fan solunum aşamalarına göre kumanda ve kontrol edilir.

Kumanda yüzeyi, mevcut parametrelerin ve uyarıların gösterilmesine ve ayarlanmasına yarar.

Bu cihaz hem bir kaçak hortumlu sistemi ile, hem de bir tek hortumlu valf sistemi (sadece prisma VENT50 ve prisma VENT50-C) ile kullanılabilir. Kaçak hortum sisteminde, bir ekspirasyon sistemi üzerinden CO₂ içeren ekspirasyon havası sürekli olarak dışarı atılır. Tek hortumlu valf sisteminde hastanın ekspirasyonu hasta valfi üzerinden kumanda edilir. Eğer cihazın içine monte edilmiş dâhili bir aküsü varsa, elektrik şebekesinin devre dışı kalması halinde cihaz kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam eder.

HFT modu (sadece prisma VENT40-C, prisma VENT50-C) ve MPV modu, ISO 80601-2-79 standartına göre solunum desteği için kullanılan modlar değildir. İlgili girişler ve hastanın solunum yolları arasında sabit ve/veya sızdırmaz kılınmış bağlantı kurulmadığı için, bağlantı kopukluğu veya bağlantısızlık tespiti gibi bazı özellikler uygulanmamıştır.

Terapi verileri SD kartı üzerine kaydedilir ve bir kişisel bilgisayar yazılımı sayesinde analiz edilip değerlendirilebilir.

Sadece prizma VENT40-C, prizma VENT50-C

Yüksek akış modunda (HFT modu) cihaz, ayarlanmış akışı harici bir HFT uyumlu nemlendiriciye besler. Burada solunum gazı, ısı derecesi ve hava nemi açısından belli şartlara göre ayarlanır. Hasta bağlantısı HFT uyumlu aksesuar ile gerçekleşir.

1.3 Uygulayıcı nitelikleri

Cihazı kullanan kişi işbu kullanma talimatında uygulayıcı olarak tanımlanıyor. Bir hasta ise tedavi edilen kişidir.

İşletici veya uygulayıcı olarak, işbu tıbbi ürünün kullanımını iyi biliyor olmanız gerekir. İşletici, cihazın ve hastaya tedavi uygulanmasına başlanmadan önce hastanın bağlı olduğu tüm bileşenlerin veya aksesuarların cihaz ile uyumluluğunu sağlamakla yükümlüdür.

Bu cihaz tıbbi bir cihazdır ve sadece doktorun talimatına göre eğitimli uzman elemanlar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı sadece doktorun veya yetkili sağlık hizmeti verenlerin talimatlarına göre kullanınız.

Cihaz hastaya verilirken, tedavi eden doktor veya klinik personeli hastaya cihazın işlevleri ve çalışması konusunda bilgi vermelidir.

Kör veya görme engelli kullanıcılar için bilgi ve uyarı

Kullanma talimatı ilgili İnternet sayfasında ek olarak elektronik sürüm olarak kullanıma sunulmaktadır.

1.4 Endikasyonlar

Obstrüktif ventilasyon bozuklukları (örn. KOAH), restriktif ventilasyon bozuklukları (örn. skolyoz, toraks deformiteleri), respiratorik yetmezliğe sebep olan nörolojik, musküler ve nöromusküler rahatsızlıklar (örn. diyafram paralizi), merkezi solunum kontrolü bozuklukları, obstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS), obezite hipoventilasyon sendromu (OHS), hipoksemik respiratorik yetmezlik.

1.5 Kontrendikasyonlar

Aşağıdaki sağlık durumlarında cihazların kullanımı kesinlikle ters etki yapar ve uygun değildir:

Spontan solunum veya akut solunum yetmezliği, bilinçsizlik, sürekli izleme olanağı olmayan bilinç bulanıklığı veya koma, pnömotoraks veya pnömomediastinum, pnömosefali veya likör fistülü, şiddetli burun kanaması, yüksek barotravma riski, tıkalı hava yolları, orta kulak iltihabı veya delikli kulak zarı, beyin ameliyatı sonrası durum ve hipofiz bezi veya orta veya iç kulakta yapılan cerrahi işlemlerden sonraki durum, başka bir nedenden dolayı üst solunum yollarında artan basınca karşı akut intolerans.

Aşağıdaki sağlık durumlarında, cihazlar yalnızca özel bir dikkatle ve bir doktora danışılarak kullanılabilir:

Akut kardiyak dekompanyasyonu veya miyokard enfarktüsü, kalpte şiddetli aritmi, belirgin hipotoni, özellikle intravasküler hacim azalması ile birlikte, şiddetli kalp yetmezliği, dehidratasyon, akut sinüzit veya akut solunum yolu enfeksiyonu, ciddi kafatası yaralanmaları, kronik solunum yolu veya orta kulak enfeksiyonları.

1.6 Yan etkiler

Cihazın kullanılması esnasında, kısa ve uzun süreli kullanım hallerinde aşağıda bildirilen istenmeyen yan etkiler meydana gelebilir: (Alerjik) nezle, halsizlik, aerofaji, merkezi uyku apnesi, burun akıntısı, baş ağrısı, otitis / kulak ağrısı, hava yutma / aspirasyon, basınç intoleransı, anksiyete, yorgunluk, göğüs bölgesinde rahatsızlık.

Bunlar WM110TD / WM120TD tipi cihazların kullanımına özgü olmayan genel yan etkilerdir.

Hasta ve cihaz düzgün bir şekilde senkronize edilmezse, etkinliğin azalması, uykusuzluk, halsizlik veya hava yollarında hasar gibi ek riskler vardır. Bu nedenle uygun tetikleme hassasiyeti ve inspirasyon süresi ayarları gereklidir.

Aşağıdaki bildirilen potansiyel yan etkiler, bir nemlendirici eklenerek hafifletilebilir: Ağız kuruluğu, kuru burun, sinüzit, burun kanaması.

Maskeler veya hava nemlendirici cihaz gibi terapi aksesuarları ek yan etkilere neden olabilir. İlgili aksesuarların kullanma talimatlarına dikkat ediniz.

Aşağıdaki bildirilen olası yan etkiler, softSTART (terapinin ilk birkaç dakikasında basınç rampası) veya softSTOP (ventilasyon kapatıldığında ters basınç rampası) gibi konfor fonksiyonları etkinleştirilerek hafifletilebilir: Boğulma duygusu, nefes almada zorluk, uykusuzluk, sabah dispnesi.

HFT modunu kullanmak (sadece prisma VENT40-C, prizma VENT50-C), bireysel hasta için faydayı korurken yan etkileri azaltmanın bir yoludur; belirti KOAH hastalarında en fazla görünür.

1.7 Kliniksel fayda

Standart modda NIV / IV / MPV:

Sabit ayarlar veya hastanın ihtiyaçlarına otomatik tepkiler yoluyla uygun ventilasyonun / solunum regülasyonunun tekrar sağlanması, solunum pompasının rahatlatılması / solunum kaslarının desteklenmesi, alveolar ventilasyonun ve kan gazlarının iyileştirilmesi, gündüz uykululuğunun azaltılması, sağlıkla ilgili kalitenin iyileştirilmesi ve hastalığın uzun dönemli prognozu, yatan hastanede yatma oranının azaltılması / alevlenmeler.

LIAM işlevinin prisma VENT50, prisma VENT50-C durumlarında ek klinik faydaları: Öksürmeye yardım ederek salgı yönetiminin desteklenmesi.

HFT modunun prisma VENT40-C, prisma VENT50-C durumlarında ek klinik faydaları: Nazofarenkstekki ölü boşluğun yıkanması, böylece CO₂ seviyesinin düşürülmesi, üst solunum yollarını nemlendirip ısıtarak mukosilyer klirensin iyileştirilmesi, oksijenlenme / gaz değişiminin iyileştirilmesi, inspirasyon akımının / hacmin artırılması, üst solunum yollarına düşük pozitif basınç uygulanması, spontan solunum durumunda solunum frekansının azaltılması.

2 Güvenlik

2.1 Güvenlik bilgi ve uyarıları

2.1.1 Cihazın, bileşenlerin ve aksesuarların kullanımı

Eğer cihaz hasarlıysa veya işlevi sınırlıysa, insanların yaralanması tehlikesi söz konusudur.

- ⇒ Cihazı ve bileşenleri sadece dış görünüşünde herhangi bir hasar belirtisi yoksa çalıştırınız.
- ⇒ Muntazam aralıklarla bir işlev kontrolü yapınız (bakınız "6.6 İşlev kontrolü", Sayfa 36).
- ⇒ Cihazı sadece öngörülmuş çevre koşulları dâhilinde çalıştırınız (bakınız "11.1 Teknik veriler", Sayfa 49).
- ⇒ Cihazı bir MRT ortamında veya bir hiperbarik odada kullanılmamalıdır.
- ⇒ Tek kullanımlık ürün, tekrar kullanmayınız. Tek kullanımlık ürünlere mikrop bulaşmış olabilir ve/veya işlevi etkilenmiş olabilir.
- ⇒ Uyarı seslerinin şiddetini uyarı sesi duyulacak kadar yüksek ayarlayınız.
- ⇒ Sadece iç çapı Ø 15 mm veya üzeri olan bir çapa sahip hortum sistemleri kullanınız.
- ⇒ Sadece üreticinin aksesuarlarını kullanınız. Özellikle yabancı elektrik bağlantı hatları cihazın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- ⇒ Sadece hasarsız aksesuarlar kullanınız.
- ⇒ Antistatik veya elektrik ileten hortumlar kullanmayınız.
- ⇒ Bu cihaz için EMC (elektromanyetik uyumluluk) hususunda özel güvenlik ve itina önlemleri geçerlidir. Cihaz ile yüksek frekanslı sinyal yayan cihazlar (örn. mobil telefonlar) arasında asgari 30 cm mesafe olması sağlanmalıdır. Bu kural, örn. anten kablosu ve harici antenler gibi aksesuarlar için de geçerlidir. Bu kurala dikkat edilmemesi cihazın performans özelliklerinin kötü etkilenmesine yol açabilir.
- ⇒ Bu cihaz, hastalar veya cihazı kullananlar için elektromanyetik arızaların sebep olabileceği zararların önlenmesi için, cihaz için öngörülmuş elektromanyetik uyumluluk (EMC) ortamları dışında (bakınız "1.1 Kullanım amacı", Sayfa 5) kullanılmamalıdır. Gövde, kablo veya elektromanyetik yalıtım için tasarlanmış başka bir donanım hasarlıysa, cihaz çalıştırılmamalıdır.
- ⇒ Cihaz başka cihazların hemen yanında veya üst üste konumlandırılarak çalıştırılmamalıdır. Aksi halde işlev bozuklukları meydana gelebilir. Eğer cihazın başka cihazların hemen yanında veya üst üste konumlandırılarak çalıştırılması gerekiyorsa, tüm cihazların muntazam çalışmasını sağlamak için tüm cihazları izleyiniz.
- ⇒ Bakteri filtresinde muntazam aralıklarla direnç yükselmesi ve blokaj kontrolü yapınız. Gerekli olması halinde: Bakteri filtresini değiştiriniz. Sislenme veya nemlenme bakterie filtrelerinin direncini yükseltebilir ve böylelikle hastaya ulaşan tedavi basıncını değiştirebilir.

2.1.2 Enerji beslemesi

Cihazın öngör÷lmüş enerji beslemesi kapsamı dışında çalıştırılması kullanıcının yaralanmasına neden olabilir ve cihaza zarar verebilir.

- ⇒ Cihazı sadece 100 V ila 240 V arasında gerilimler ile çalıştırınız.
- ⇒ 12 V DC veya 24 V DC gerilimlerde çalıştırmak için, uygun inverter kullanınız.
- ⇒ Elektrik fişinin ve şebeke beslemesinin her zaman erişilebilir olmasını sağlayınız.

2.1.3 Oksijen ile çalışılması

Özel koruma düzeneği kullanılmadan oksijen beslenmesi yangına yol açabilir ve insanları yaralayabilir.

- ⇒ Oksijen besleme sisteminin kullanma talimatını dikkate alınız.
- ⇒ Oksijen kaynaklarını kurulu olduğu yerlerin cihaza olan mesafesinin 1 m'den daha fazla olmasına dikkat ediniz.
- ⇒ Beslenen oksijeni l/dk türünden ayarlanmış olan hızı, ayarlanmış HFT akış hızını aşmamalıdır (sadece prisma VENT40-C, prisma VENT50-C).
- ⇒ Terapi sonunda oksijen beslemesini kapatınız ve cihazı çalıştırmaya devam ederek, cihaz sistemindeki bakiye oksijenin de cihazdan çıkmasını sağlayınız.
- ⇒ Oksijen dozajını bir doktor ile anlaşarak belirleyiniz.

2.1.4 Taşıma

Cihazın içine girmiş olabilecek su ve pislik cihaza zarar verebilir.

- ⇒ Cihazı, solunum havası nemlendiricisi doluyken sevk etmeyiniz ve devirmeyiniz.
- ⇒ Cihazı sadece kapağı monte edilmiş şekilde sevk ediniz.
- ⇒ Cihazı ilgili taşıma çantası içinde sevk ediniz, muhafaza ediniz veya depolayınız.

2.2 Genel bilgiler




- Yabancı parçalar kullanılması cihaz ile uyumsuzluklara neden olabilir. Eğer orijinal yedek parçalar kullanılmazsa, bu gibi durumlarda her türlü garanti ve sorumluluk haklarınızı kaybedeceğinizi lütfen dikkate alınız.
- Onarım, bakım ve koruyucu bakım ya da denetim çalışmaları ve cihazda değişiklikler yapılması gibi önlemlerin sadece üretici firma veya bu firma tarafından açık bir şekilde yetkilendirilmiş bir uzman personel tarafından yapılmasını sağlayınız.
- Sadece bu kullanma talimatına göre kullanılmasına izin verilen cihazları ve modülleri bağlayınız. Cihazlar ilgili ürün standartlarına uygun olmalıdır. Tıbbi olmayan cihazları hasta çevresi dışında bir yere konumlandırınız.
- Olası bir enfeksiyonu veya bakteriyolojik kontaminasyonu engellemek için, hijyenik hazırlama bölümünü dikkate alınız (bakınız "6 Hijyenik hazırlama", Sayfa 33).
- Bir elektrik kesilmesi halinde, uyarı ayarları da diğer tüm ayarlar da olduğu gibi korunur.

- Solunum akımı içinde kalan aksesuar parçaları kullanılması, örn. bakteri filtresi, cihaz parametrelerinin yeniden ayarlanmasını gerekli kılabilir. Sisteme aksesuar parçaları bağladığınız zaman, ekspirasyon esnasında hasta bağlantı deliğinde basıncın yükselebileceğini dikkate alınız.
- AB dâhilinde: Kullanıcı ve/veya hasta olarak, ürün ile ilişkili ortaya çıkan ciddi ve önemli olayları üreticiye ve yetkili resmi daireye bildirmelisiniz.

2.3 Bu dokümandaki ikaz bilgileri


İkaz bilgileri, insanlar veya eşyalar için tehlikeye yol açabilecek bir işlem adımından önceki güvenlik açısından önemli bir bilgiye dikkat çeker.

İkaz bilgileri, tehlike derecesine bağlı olarak üç farklı tehlike kademesine göre gösterilir:

 UYARI	<p>Uyarı! Olağan üstü büyük bir tehlikeli duruma işaret eder. Bu uyarıyı dikkate almadığınız takdirde, tedavi edilmesi mümkün olmayan ağır veya ölümcül yaralanmalar meydana gelebilir.</p>
 DİKKAT	<p>Dikkat! Tehlikeli bir duruma işaret eder. Bu uyarıyı dikkate almadığınız takdirde, hafif veya orta derecede yaralanmalar meydana gelebilir.</p>
DUYURU	<p>Duyuru! Zararlı bir duruma işaret eder. Bu uyarıyı dikkate almadığınız takdirde, maddi hasarlar meydana gelebilir.</p>
	<p>İşlem akışları içerisinde yararlı bilgi ve uyarılara işaret eder.</p>

3 Ürünün tanıtımı

3.1 Genel bakış prizma VENT30, prizma VENT30-C, prizma VENT40, prizma VENT40-C

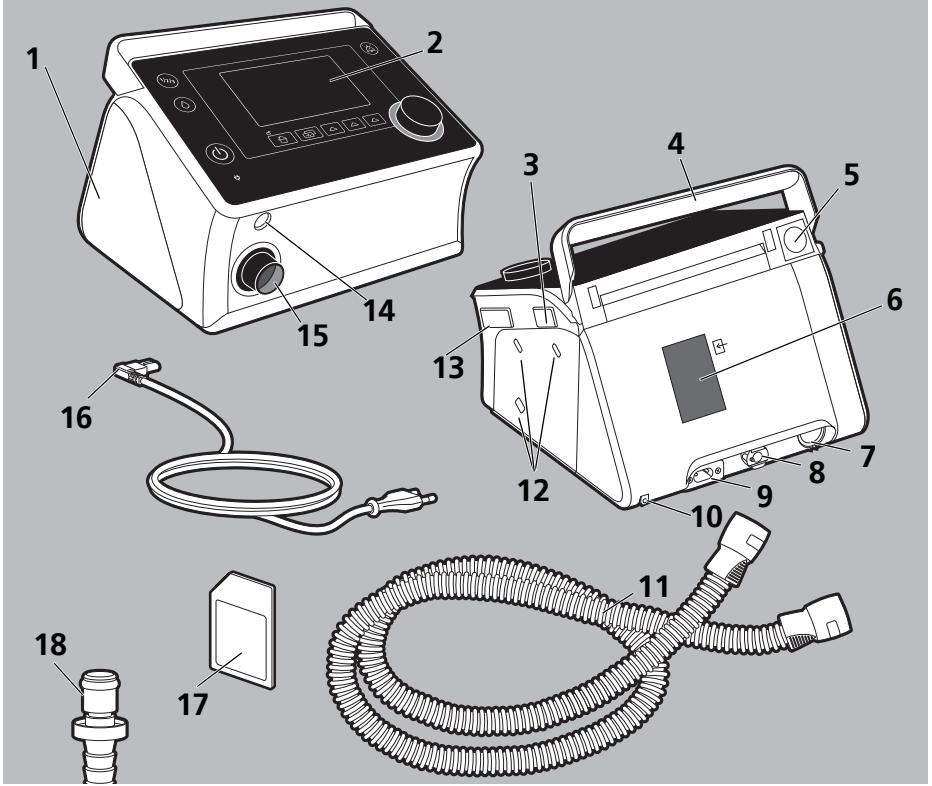


- | | |
|---|--|
| 1 Kapaklı nemlendirici bağlantısı | 10 Güç kablosu için çekmeye karşı gerilim azaltıcı |
| 2 Ekranlı kumanda paneli | 11 Kaçak hortum sistemi |
| 3 Modüllerin bağlanması için sistem arabirimi | 12 Modüllerin bağlanması için kilitleme delikleri |
| 4 Taşıma kolu | 13 SD kartı yuvası |
| 5 Kilit açma düğmesi | 14 Hortum ısıtması bağlantısı |
| 6 Hava filtresini ve polen filtresini içeren filtre bölmesi | 15 Cihaz çıkışı |
| 7 Kapama tapası | 16 Elektrik bağlantı kablosu |
| 8 O ₂ girişi | 17 SD kart |

9 Elektrik şebekesi kablo bağlantısı

18 O₂ bağlantı ucu (seçmeli)

3.2 Genel bakış prisma VENT50, prisma VENT50-C

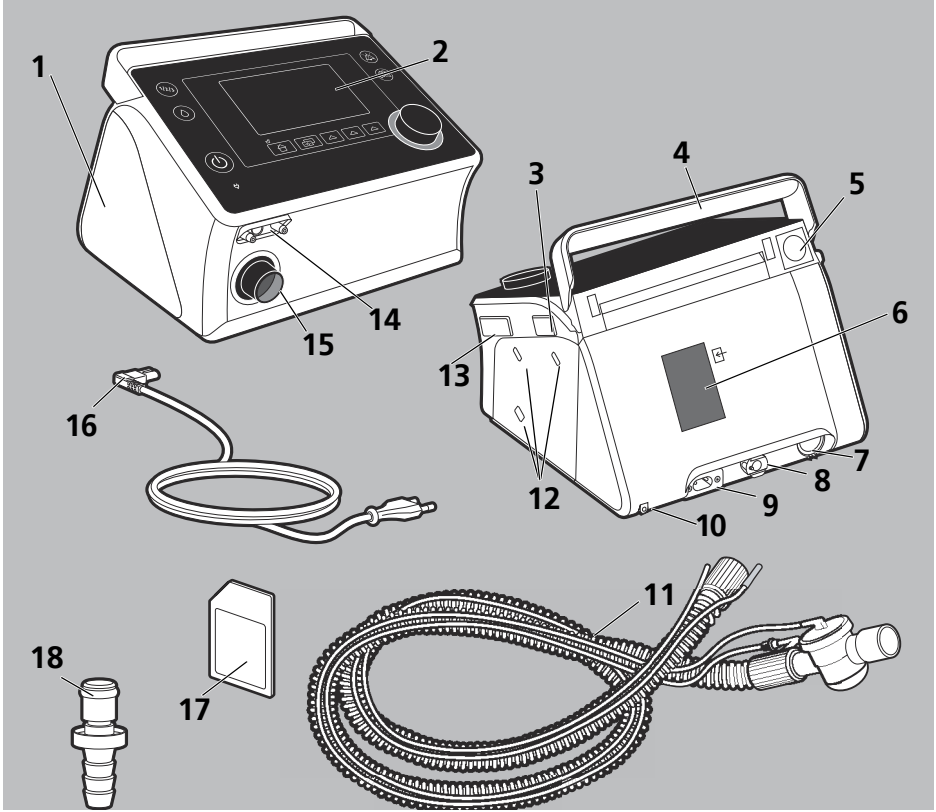

1 Kapaklı nemlendirici bağlantısı

2 Ekranlı kumanda paneli

3 Modüllerin bağlanması için sistem arabirimi

4 Taşıma kolu

5 Kilit açma düğmesi

6 Hava filtresini ve polen filtresini içeren filtre bölmesi

7 Soğutma havası deliği

8 O₂ girişi

11 Tek hortumlu valf sistemi

12 Modüllerin bağlanması için kilitleme delikleri

13 SD kartı yuvası

14 Hortum ısıtması, valf kontrol hortumu ve basınç ölçme hortumu için bağlantılar

15 Cihaz çıkışı

16 Elektrik bağlantı kablosu


17 SD kart

- 9 Elektrik şebekesi kablo bağlantısı
- 10 Güç kablosu için çekmeye karşı gerilim azaltıcı
- 18 O₂ bağlantı ucu

3.3 Çalışma konumları

- **Açık:** Terapi uygulanıyor.
- **Bekleme:** Fan kapalıdır, fakat Açma-Kapatma tuşuna kısaca basılınca hemen çalışmaya hazır olur. Bekleme konumunda cihazda ayarlamalar yapmak mümkündür.
- **Kapalı:** Cihaz kapalıdır. Herhangi bir ayar yapılması mümkün değildir ve ekran karanlık kalır.

3.4 Kumanda paneli

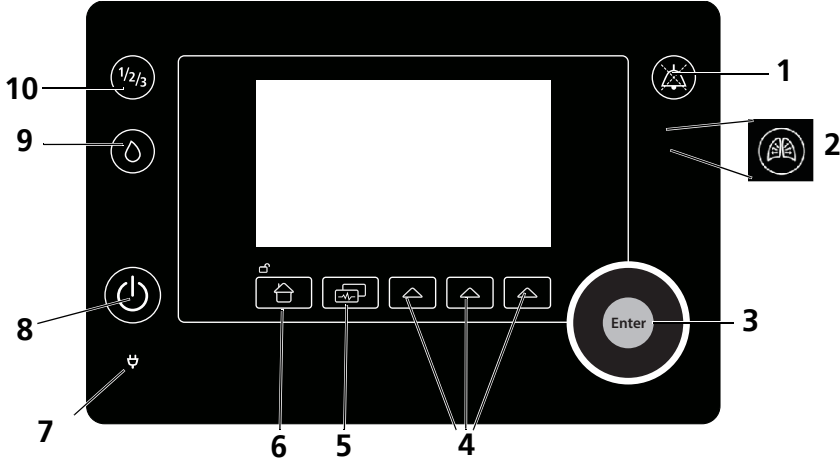
















- 1 Alarm onaylama tuşu - Bir alarmı 2 dakika sessiz konumuna alır
- 2 LIAM tuşu (sadece prisma VENT50 ve prisma VENT50-C modellerinde mevcuttur)
- 3 Menü dâhilinde gezinmek için çevirmeli düğme
- 4 **Sistem, softSTART/softSTOP veya Ventilasyon, Rapor** menüleri ve **Geri** işlevi arasında geçişler için işlev tuşları
- 5 Farklı ekran görüntüleri arasında geçiş yapmak için ekran tuşu
- 6 Ana menü tuşu - Görüntünün başlangıç ekranına geri dönmesini sağlar, uzman menüsüne erişim sağlar
- 7 Elektrik şebekesi gerilim göstergesi
- 8 Açma-Kapama tuşu

9 Nemlendirici tuşu

10 Ön konfigürasyonlu programların seçimi için program tuşu

3.5 Ekrandaki semboller

SEMBOL	AÇIKLAMA
	Cihaz hasta modundadır. Uzman menüsü kilitli.
	Cihaz uzman modunda (cihaz kilidi açık)
	Kaçak hortum sistemi bağlı (sadece prisma VENT50 ve prisma VENT50-C).
	Tek hortumlu valf sistemi bağlı (sadece prisma VENT50 ve prisma VENT50-C).
	Cihaz bekleme modundadır (Stand-by). Fan kapalıdır.
	Hava filtresinin değiştirilmesi gereklidir (sadece eğer filtre işlevi etkinleştirilmişse).
	Bakım gereklidir (sadece eğer bakım işlevi etkinleştirilmiş ise).
	Solunum havası nemlendiricisi bağlanmıştır, fakat etkin değildir (gri sembol)
	Solunum havası nemlendiricisi devreye sokulmuştur (yeşil sembol).
	Solunum havası nemlendiricisi boş (turuncu sembol).
	Nabız değeri (nabız oksimetre sensörü bağlı olduğunda).
	SpO ₂ sensörü bağlanmış.
	Modül prismaCONNECT bağlanmış.
	Modül prismaCHECK bağlanmış.
	Modül prismaPSG bağlanmış.
	Ağ bağlantısı mevcuttur.
	SD kartı takılmıştır (karta verilerin yazılması esnasında yeşil yanıp söner).
	Solunum durumunu gösterir: <ul style="list-style-type: none"> Ok işareti yukarıya doğru: Soluk alma Ok işareti aşağıya doğru: Soluk verme S: Spontane solunum T: Zorunlu solunum

SEMBOL	AÇIKLAMA
	Hedef volüm devreye sokulmuş
	Airtrap-Control (hava kapanı kontrolü) devreye sokulmuş.
	LIAM etkinleştirilmiştir. (sadece prisma VENT50, prisma VENT50-C)
	5 dilim yeşil: Akü kapasitesi %85'ten fazla
	4 dilim yeşil: Akü kapasitesi %65'ten fazla
	3 dilim yeşil: Akü kapasitesi %45'ten fazla
	2 dilim yeşil: Akü kapasitesi %25'ten fazla
	1 dilim turuncu: Akü kapasitesi %25'ten düşük
	1 dilim kırmızı: Akü kapasitesi %10'dan düşük
	0 dilim: Akü kapasitesi %5'ten düşük
	Akü hatası
	Düşük derecede önceliğe sahip uyarı verildi.
	Orta derecede önceliğe sahip uyarı verildi.
	Yüksek derecede önceliğe sahip uyarı verildi.
	Tüm fizyolojik uyarılar devre dışı bırakılmıştır.
	Uyarı akustik sinyali mola modunda.
	Alarm akustik sinyali devre dışı bırakılmıştır.
	softSTART işlevi dak:sn türünden geriye kalan zamanın gösterildiği işlev ile başlatılmıştır
	softSTOP işlevi dk:sn türünden rampa geriye kalan zamanın gösterildiği işlev ile başlatılmıştır
	Maskenin yerleşimi iyi, hava kaçağı yok.
	Maskenin yerleşimi yetersiz, hava kaçağı yoğun, terapi verimliliği garanti edilemez.

4 Hazırlık ve kullanım


4.1 Cihazın Konumlandırılması

DUYURU

Aşırı ısınma nedeniyle maddi hasarlar!

Çok yüksek ısı dereceleri cihazın aşırı ısınmasına yol açabilir ve cihaza zarar verebilir.

- ⇒ Cihazın ve güç kaynağının üzerini tekstil malzemeleri (örn. yatak örtüsü) ile örtmeyiniz.
- ⇒ Cihazı bir kaloriferin yakınında kullanmayınız.
- ⇒ Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.
- ⇒ Cihazı taşıma çantasının (prismaBAG advanced) içinde çalıştırmayınız.

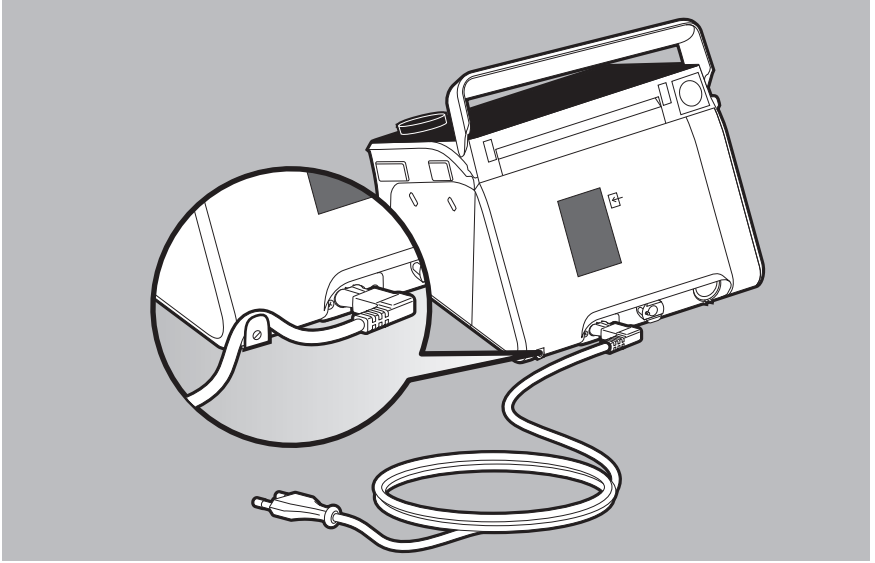

1. Elektrik şebekesi bağlantı kablosunu terapi cihazına ve elektrik prizine bağlayınız.



Alternatif olarak, ISO80601-2-80'e uygun bir doğru akım besleme ağını (12 V DC veya 24 V DC) kullanmak için bir elektrik bağlantı kablosunu invertere bağlayabilirsiniz.

4.2 Hortum sisteminin bağlanması

⚠ UYARI

Uyumlu olmayan aksesuarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Tarif edilen solunum cihazı için tasarlanmamış aksesuarların kullanımı hastayı tehlikeye sokabilir.

- ⇒ Sadece tarif edilen solunum cihazı ile kullanılması öngörölmüş olan aksesuarları bağlayınız.

⚠ UYARI

Ekspirasyon sistemsiz, girişimsel olmayan veya girişimsel olan solutma girişleri kullanılmasından dolayı boğulma tehlikesi söz konusudur!

Entegre edilmiş ekspirasyon sistemi olmayan, girişimsel olmayan veya girişimsel olan solutma girişleri kullanılması halinde, CO₂ oranı kritik değerlere yükselebilir ve hasta için tehlike oluşturabilir.

- ⇒ Eğer bir ekspirasyon sistemi entegre edilmemişse, harici ekspirasyon sistemi donanımı olan, girişimsel olmayan veya girişimsel olan solutma girişleri kullanınız.
- ⇒ Ekspirasyon sisteminin kullanma talimatını dikkate alınız.


⚠ DİKKAT

Yanlış yerleştirilmiş hortum sistemi nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Yanlış yerleştirilmiş bir hortum sistemi hastayı yaralayabilir.

- ⇒ Hortum sistemini kesinlikle boyun ve boğaz etrafına dolamayınız.
- ⇒ Hortum sistemini sıkıştırıp ezmeyiniz.

4.2.1 Kaçak hortum sistemi bağlanması

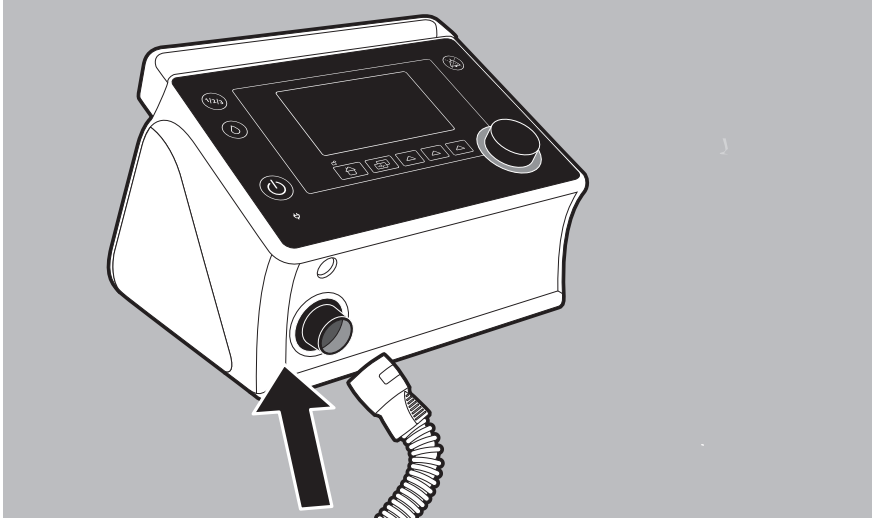

1. Kaçak hortum sistemini cihaz çıkışına takınız.
2. Girişimsel olmayan veya girişimsel olan soluma girişini kaçak hortum sistemine bağlayınız (soluma girişinin kullanma talimatına bakınız).


4.2.2 Tek hortumlu valf sisteminin bağlanması (sadece prisma VENT50 ve prisma VENT50-C)



⚠ UYARI

CO₂ gazının geri solunması nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Kapalı bir hasta valfi nedeniyle nefes verme havası dışarı iletilemez ve hasta CO₂ geri soluması nedeniyle tehlike altındadır.

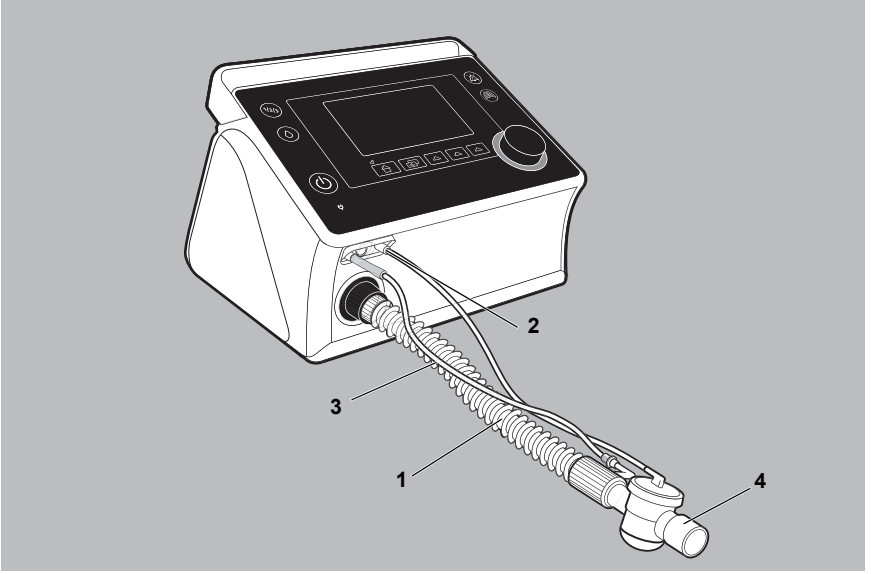⇒ Hasta valfinin daima serbest olmasını sağlayınız.




1. Tek hortumlu valf sisteminin serbest ucunu **1** cihaz çıkışına takınız.
2. Valf kontrol hortumunu **2** ilgili  bağlantısına bağlayınız.
3. Basınç ölçme hortumunu **3**  bağlantısına bağlayınız.
4. Soluma girişini (örn. solunum maskesi) hasta valfine **4** bağlayınız.

DUYURU

Cihaz, hasta yakınında basınç ölçümü yapılmayan bir valf sistemi ile de çalıştırılabilir. Bu durumda basınç ölçme hortumu bağlantısı kullanılmaz (hortum testi yapınız).

4.2.3 Ağızlıkla solutmak için hortum sisteminin bağlanması (sadece prisma VENT50 ve prisma VENT50-C)

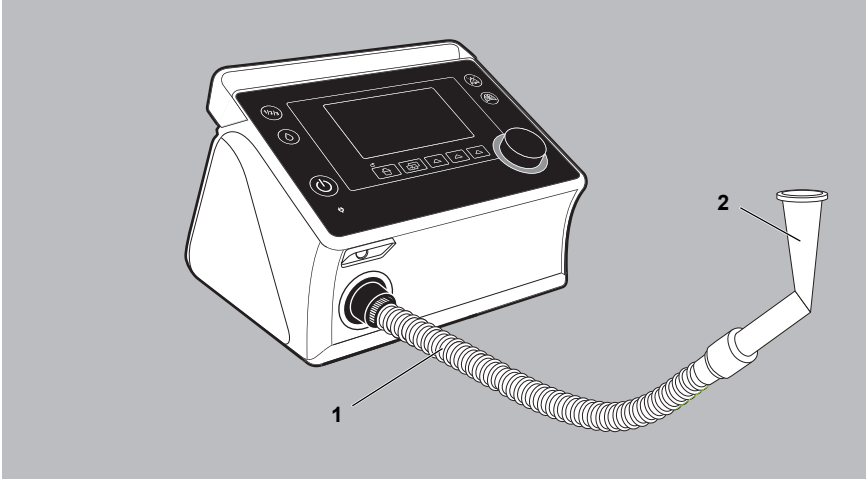


1. Ağızlıkla solutmak için hortum sistemini **1** cihaz çıkışına takınız.
2. Ağızlığı **2** ağızlıkla solutmak için hortum sistemine bağlayınız (soluma girişinin kullanma talimatına bakınız).

DUYURU

Kaçak hortum sistemine alternatif olarak bir tek hortumlu valf sistemi de ağızlıkla solutmak için kullanılabilir.

4.2.4 HFT hortum sisteminin bağlanması (sadece prisma VENT40-C ve prisma VENT50-C, bir HFT uyumlu nemlendirici ile bağlantılı olarak)

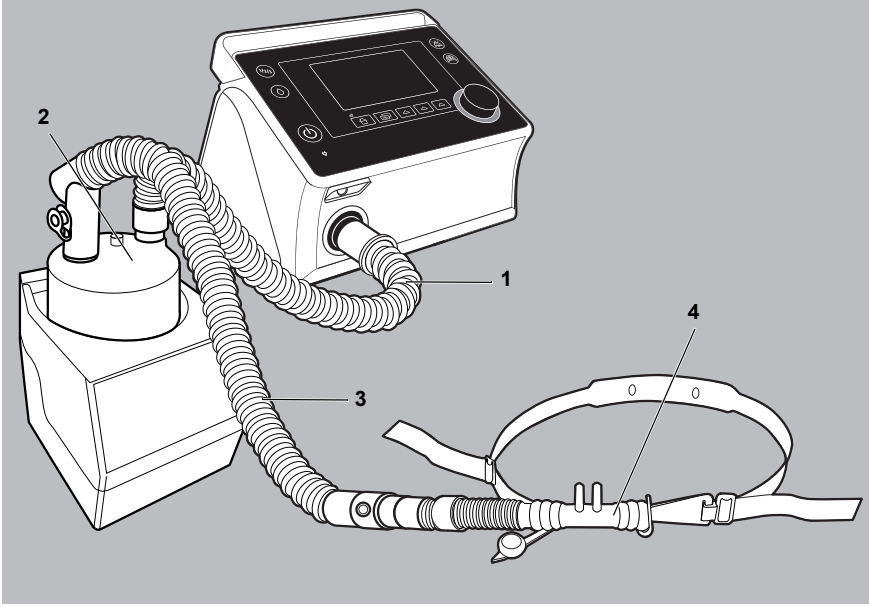

1. İspirasyon hortumunu (kısa) **1** cihaz çıkışına takınız.
2. İspirasyon hortumunun diğer ucunu (kısa) **1** ilgili nemlendirme hücresinin **2 In** işaretli bağlantısına takınız.
3. Şimdi inspirasyon hortumunu (uzun) **3** nemlendirme hücresinin **2 Out** işaretli bağlantısına takınız.
4. HFT burun kanülünü **4** ilgili inspirasyon hortumuna (uzun) **3** bağlayınız.
5. Gerekirse hortum ısıtıcıyı ve ısı derecesi sensörünü inspirasyon hortumuna (uzun) **3** bağlayınız (bakınız Harici nemlendiricinin kullanma kılavuzu).

4.3 İlk kez kullanmadan önce

İlk kez kullanmadan önce cihazın konfigürasyonu yapılmalıdır. Eğer bu işlem henüz yetkili satıcınız tarafından yapılmadıysa, cihazda dil ve saat ayarını yapmanız gerekir.



Eğer cihaz bir dâhili akü ile donatılmışsa, cihazı önce en az 8 saat elektrik şebekesine bağlı bırakınız.



ISO 80601-2-80 standartına uygun dahili akülü cihazlar.

4.4 Terapinin başlatılması

Ön koşul

- Cihaz yerine kurulmuş ve bağlanmış olmalıdır ([bakınız "4.1 Cihazın Konumlandırılması", Sayfa 17](#)).
 - Solutma girişi bağlanmıştır (solutma girişinin kullanma talimatına bakınız).
1. Eğer ekran karanlıksa: Açma-Kapama tuşuna  kısa basınız. Cihaz bekleme moduna geçer.
 2. Açma-Kapama tuşuna  kısa basınız.

veya

Eğer otomatik başlama (Autostart) işlevi etkinleştirilmişse: Solutma girişinin içine nefes veriniz.





Terapi başlar.

Seçilmiş programda softSTART işlevi etkinleştirilmişse, terapi otomatik olarak softSTART ile başlar.



Otomatik başlama (Autostart) ile ilgili daha fazla bilgi için: [Bakınız "5 Menü maddelerindeki ayarlamalar", Sayfa 28](#).

4.5 Terapinin sona erdirilmesi / Cihazın kapatılması

1. Açma-Kapama tuşuna , **Terapiyi sona erdir** görüntüsü artık gösterilmeyinceye kadar uzun basınız. Cihaz bekleme moduna geçer. softSTOP işlevi etkinleştirilmişse, solunum basınçları ve arka alan frekansı sürekli azaltılır. Geriye kalan süre dakika ve saniye  0:40 türünden sembol çubuğunda gösterilir. Ayarlanmış softSTOP süresi geçince, cihaz bir 4 hPa EPAP ve 5 bpm arka alan frekansı ile çalışmaya devam eder; Açma-Kapama tuşu  kısaca basılıp bekleme moduna geçilinceye kadar. softSTOP işlevini iptal etmek için, softSTART/softSTOP tuşuna (orta işlev tuşu **4**) kısa basınız.
2. Cihazı tamamen kapatmak için, Açma-Kapama tuşuna  artık **Cihazı kapat** mesajı gösterilmeyinceye ve ekran kapanıncaya kadar basınız.
3. Cihazı akım beslemesinden ayırmak için, elektrik fişini çekip çıkarınız (dahili akü şarj edilmez).

4.6 Solunum havası nemlendiricisinin ayarlanması

⚠ DİKKAT





Entegre edilmiş nemlendiricinin prismaAQUA kullanılmasından kaynaklanan yaralanma tehlikesi!

Entegre edilmiş nemlendiricinin prismaAQUA yüksek akış terapisi veya ile ilişkili kullanımı veya üst solunum yollarında baypas olan hastalarda kullanımı hastayı tehlikeye sokabilir.

- ⇒ prismaAQUA, yüksek akış terapisinde kullanılmamalıdır.
- ⇒ prismaAQUA, üst solunum yollarında baypas olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Ön koşul

Solunum havası nemlendiricisi bağlı ve içine su doldurulmuş olmalıdır (solunum havası nemlendiricisinin kullanma talimatına bakınız)

1. Solunum havası nemlendiricisini açmak veya kapatmak için nemlendirici tuşuna  kısa basınız.
Nemlendirici etkin olduğunda, nemlendirici tuşunun  lambası söner.
Ekrandaki nemlendirici sembolü  yanar.
2. Nemlendirici kademesinin ayarını değiştirmek için nemlendirici tuşuna  uzun basınız.



Sizin için en uygun nemlendirici kademesinin hangisi olduğu oda sıcaklığına ve havadaki nem oranına bağlıdır. Solunum yollarınızın sabah saatlerinde kuru olması halinde, ısıtma gücü çok düşük ayarlanmış demektir. Hortum sisteminde sabah saatlerinde yoğunlaşmış su oluşmuş olması halinde, ısıtma gücü çok yüksek ayarlanmış demektir.

4.7 Ön konfigürasyonlu programın seçilmesi


Doktorunuz cihazda ön konfigürasyonlu azami üç program kaydedebilir. Eğer örn. gündüz başka bir solunum ayarına ve gece başka bir ayara ihtiyacınız varsa, program değiştirmeniz mümkündür.

⚠ DİKKAT

Yanlış solunum programları kullanılması nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Kişiye özel konfigüre edilmemiş solunum programlarının kullanılması durumunda, yanlış terapi söz konusu olabilir ve bu da hasta için tehlike teşkil eder.

- ⇒ Solunum programlarını sadece ilgili hasta için konfigüre edilmiş olması halinde kullanınız.



1. Program tuşuna  basınız.

2. Programı çevirmeli düğme ile seçiniz ve onaylayınız.

4.8 LIAM (sadece prisma VENT50, prisma VENT50-C)

LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver) öksürme durumlarında veya kesikli derin solumada destekleme işlemi için kullanılır.

Ön koşul


- Terapi uygulanıyor
 - LIAM işlevi doktor tarafından kullanıma açılmıştır.
1. LIAM tuşuna  basınız.
Cihaz LIAM moduna geçer ve işlem bir sonraki nefes alma ile eşzamanlı olarak başlatılır.
 2. LIAM işlevini iptal etmek için: LIAM tuşuna  yeniden basınız.
İşlem iptal edilir. Cihaz, ayarlanmış olan solutma moduna geri döner.

4.9 softSTART işlevinin açılması ve kapatılması

softSTART işlevi, uykuya dalmanız esnasında solunum basıncına alışmanızı kolaylaştırmaktadır. Yönetmelikten veya öngörülen değerden farklı olan bir basınç ve seçmeli olarak bir de basınç farkı ayarlanır. Devreye sokma esnasında terapi cihazı bu softSTART basıncını ayarlar. Ardından basınçlar öngörülen zaman süresi dâhilinde yavaşça terapi seviyesine kadar yükselir.

Bu işlev, henüz uykuya dalmamış bir durumda yüksek basınçlardan rahatsız olan ve uykuya dalamayan hastalar için uygundur.

Ön koşul

- softSTART işlevi doktor veya yetkili satıcı tarafından etkinleştirilmiştir.
 - softSTART işlevi, seçilmiş solutma modu tarafından desteklenir (S, ST, autoST, T, aPCV, PSV veya PCV).
 - Kaçak hortum sistemi kullanılır.
 - Bir softSTART süresi ayarlanmıştır.
1. Terapinin başlatılması ([bakınız "4.4 Terapinin başlatılması", Sayfa 23](#)).
Terapi otomatik olarak softSTART ile başlar.
Geriye kalan süre dakika ve saniye  0:16 türünden sembol çubuğunda gösterilir.
 2. softSTART/softSTOP tuluna (orta işlev tuşu **4**) basarak, softSTART işlevini kapatınız.
 3. softSTART işlevi, softSTART/softSTOP tuşuna (orta işlev tuşu **4**) basılarak her zaman iptal edilebilir, kesilebilir veya yeniden başlatılabilir.



Eğer softSTART/softSTOP tuşuna (orta işlev tuşu **4**) bekleme modunda basarsanız, cihaz hasta menüsüne geçer ve siz softSTART zamanını ve softSTART-EPAP işlevini doktorunuz veya yetkili satıcı tarafından konfigüre edilmiş değer aralığında ayarlayabilirsiniz veya kapatabilirsiniz (softSTART zamanı **OFF**) (bakınız "5.2.4 Hasta menüsü - softSTART/softSTOP", Sayfa 30).


4.10 SD kartının (seçmeli) kullanılması


Eğer bir SD kartı mevcutsa, cihaz terapi verilerini otomatik olarak bu SD kartının üzerine kaydeder. Terapi cihazının çalıştırılması için bir SD kartı gerekli değildir. Terapi verileri ve ayarlar cihaz dâhilinde de kaydedilir (azami 14 gün).


DUYURU

Elektrik kesilmesi halinde veriler kaybolur!

Eğer verilerin kaydedilmesi esnasında cihaz elektrik şebekesi beslemesinden ayrılırsa, veriler kaybolabilir.

⇒ Cihazı veriler kaydedilirken (SD kartı sembolü  yanıp söner) elektrik şebekesi beslemesine bağlı bırakınız.

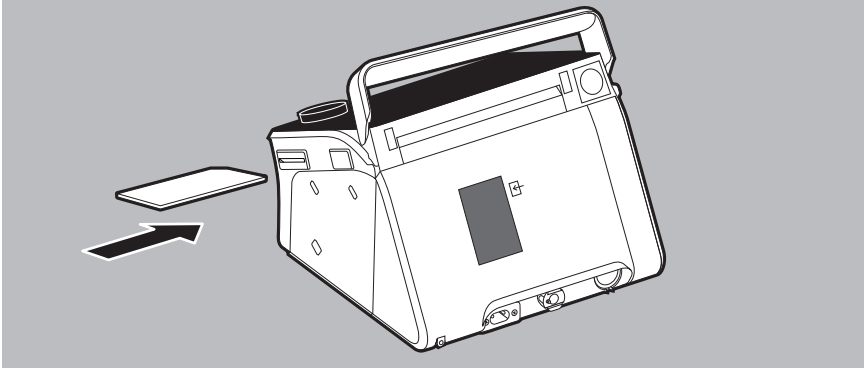

1. SD kartını SD kartı yuvasına takınız ve duyulur şekilde yerine oturuncaya kadar içeri iteleyiniz.
Ekranda SD kartı sembolü gösterilir .
2. Kartı yuvadan dışarı çıkarmak için SD kartına kısa basınız ve SD kartını çıkarıp alınız.





Eğer SD kartını göndermek istiyorsanız: Doktora veya yetkili satıcıda muhtemel karışıklıkları önlemek için SD kartına adınızı ve doğum tarihinizi yazınız.

4.11 Akünün (seçmeli) kullanılması

Cihazınız seçmeli olarak dâhili bir akü ile donatılmış olabilir. Eğer cihaz elektrik şebekesine bağlı değilse veya elektrik beslemesi kesilirse, akü otomatik olarak cihazın elektrik beslemesini üstlenir.

4.11.1 Genel bilgiler

- Akü çalışma süreleri solunum ayarlarına ve çevre ısı derecesine bağlıdır.
- Zaman planlaması yaparken, düşük veya çok yüksek dış ısı derecelerinde akü çalışma süresinde belirgin bir azalma olacağını dikkate alınız.
- Eğer alarm **Akü kapasitesi kritik**  gösterilirse, artık sadece %10 kadar bir bakiye akü kapasitesi var demektir. Eğer alarm **Akü kapasitesi çok kritik**  gösterilirse, cihaz bir kaç dakika sonra kapanacak demektir (bakiye akü kapasitesi %5'ten daha az). Alternatif bir solunum olanağını hazır bulundurunuz.
- Eğer cihaz ve pil bildirilen işletme ısı dereceleri dışında depolandıysa, cihaz ancak yeniden işletme ısı derecesine kadar ısındıktan veya soğutulduktan sonra çalıştırılmalı ve kullanılmalıdır.

4.11.2 Akü şarj ediliyor

Cihaz elektrik şebekesine bağlandığı zaman, akü otomatik olarak şarj edilir. Akü göstergesinin hareket eden ışık dilimleri şarj durumunu gösterir. Eğer akü göstergesinde 5 dilim yanıyorsa ve artık yanıp sönmüyorsa, akü tamamen şarj edilmiştir.


5 Menü maddelerindeki ayarlamalar

5.1 Cihaz dâhilinde gezinmek

YAPILACAK İŞ	SONUÇ	
	MENÜDE	BİR MENÜ MADDESİ DÂHİLİNDE
İşlev tuşuna basılması 	İşlev ekranda doğrudan tuşun üst tarafında gösterilir (örn. Menüler Sistem , softSTART/softSTOP veya Ventilasyon , Rapor veya Geri).	
Çevirmeli düğmenin sola çevrilmesi	Yukarıya doğru gezinmek	Değerin düşürülmesi
Çevirmeli düğmenin sağa çevrilmesi	Aşağıya doğru gezinmek	Değerin yükseltilmesi
Çevirmeli düğmeye basılması	Menü maddesinin seçilmesi	Ayarlanmış değer onaylanması
Ana menü tuşuna basılması 	Başlangıç ekranına geri dönülür	
Ekran tuşuna basılması 	Farklı ekran görüntüleri arasında geçiş yapılır.	

5.2 Hasta menüsü

5.2.1 Hasta menüsünün yapısı

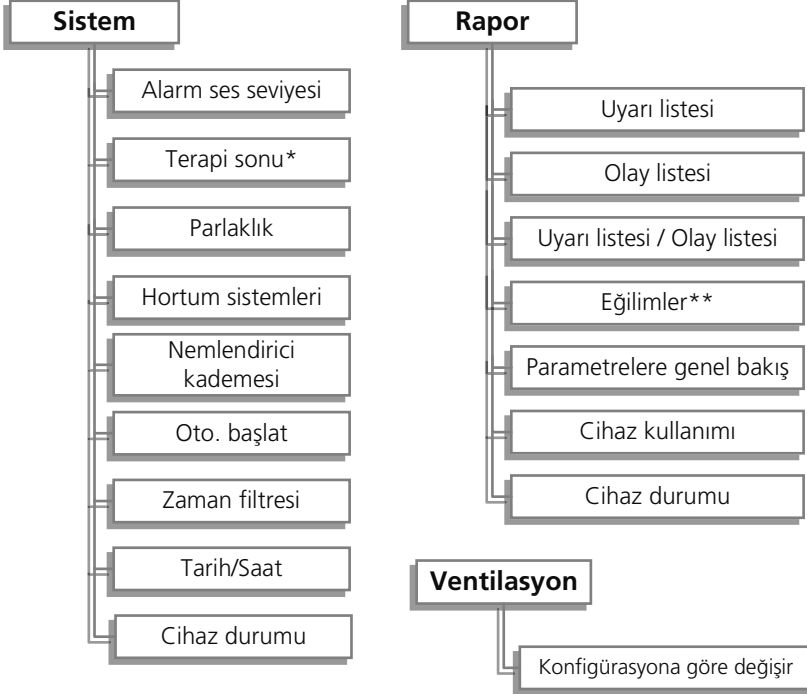

*sadece prisma VENT50, prisma VENT 50-C

*uzman bölümünde etkinleştirilmelidir

5.2.2 Hasta menüsü - Sistem

Müteakip tabloda, bu menüdeki parametreler ile ilgili bilgiler bulacaksınız. Menüde gezinmek için diğer bilgiler: [Bakınız "5.1 Cihaz dâhilinde gezinmek"](#), Sayfa 28.

PARAMETRE	AÇIKLAMA
Alarm ses seviyesi	Burada alarm sesinin şiddetini ayarlayabilirsiniz.
Parlaklık	Burada ekranın parlaklığını veya aydınlığını ayarlayabilirsiniz.
Terapi sonu (sadece prisma VENT50 ve prisma VENT50-C)	Burada alarmin terapi sonunda ya da softSTOP işlevinin devreye sokulmasının başında etkinleştirilmiş / devre dışı bırakılmış olup olmadığını görebilirsiniz.

PARAMETRE	AÇIKLAMA
Hortum sistemleri	Burada hangi hortum sisteminin kullanıldığını görebilirsiniz ve hortum testini yapabilirsiniz. Hortum testi esnasında O ₂ beslemesi kapatılmış olmalıdır. Terapinin doğru olması için, hortum sistemi değiştirilmesinde bu testin yapılması faydalı olacaktır. Bu testte direnç, uyum ve sızdırmazlık kontrol edilir.
Nemlendirici kademesi	Burada solunum havası nemlendiricisinin nemlendirici kademesini ayarlayabilirsiniz. Sizin için hangi ayarın uygun olduğu, oda sıcaklığına ve havadaki nem oranına bağlıdır. Solunum yollarının kuru olması halinde nemlendirici kademesini yükseltiniz. Hortum sisteminde yoğunluk su olması halinde nemlendirici kademesini düşürünüz.
Oto. başlat	Burada otomatik başlama (Autostart) işlevini açabilir veya kapatabilirsiniz. Otomatik başlama işlevi açıksa, solutma girişine nefes verildiğinde cihaz devreye girer.
Filtre zamanlayıcısı	Burada filtre değiştirilmesinin hatırlatılması işlevini reset edebilir veya sıfırlayabilirsiniz.
Tarih/Saat	Burada güncel saati ve güncel tarihi ayarlayabilirsiniz.
Cihaz durumu	Burada aşağıdaki bilgileri bulacaksınız: <ul style="list-style-type: none"> • Cihazın ismi • Seri numarası • Firmware sürümü • Aküye (eğer varsa) ait bilgiler • PIC* • Son iletme tarihi* • ID kodu* *sadece bir modem bağlı olduğunda mevcuttur.

5.2.3 Hasta menüsü - Ventilasyon

Ventilasyon menüsü güncel solunum parametrelerinin ayarlarını gösterir. Hangi parametrelerin gösterileceği, ayarlanmış solutma moduna göre değişir. Bu menü sadece uzman menüsünde işlenebilir ve kullanılabilir. Hasta modunda ayarlar değiştirilemez. Eğer cihazda birden fazla ön konfigürasyonu yapılmış programın kullanımına izin verilmişse, burada ilgili program seçilebilir.

5.2.4 Hasta menüsü - softSTART/softSTOP

softSTART/softSTOP menüsünü açmak için, cihaz bekleme modunda olmalıdır. Eğer doktor veya yetkili satıcı tarafından kullanımına izin verilmişse, burada müteakip parametreler ayarlanabilir:

PARAMETRE	AYARLANABİLİR DEĞERLER	AÇIKLAMA
softSTART zamanı T	Doktor veya yetkili satıcı tarafından öngörölmüş değer çerçevesinde 5 dakikalık adımlar halinde ayarlanabilir (örn. 5 dk ile azami 45 dk arasında).	Burada, solunum basıncının softSTART işlevi çerçevesinde tedavi basıncına kadar yükseleceği zaman aralığını ayarlayabilirsiniz. Eğer bu işlev seçilemiyorsa, doktor veya yetkili satıcı tarafından kullanımına izin verilmelidir.
softSTART-EPAP basıncı	Doktor veya yetkili satıcı tarafından öngörölmüş değer çerçevesinde 0,2 hPa değerinde adımlar halinde ayarlanabilir (örn. asgari 4 hPa ile azami 25 hPa arasında).	Burada softSTART işlevinin başladığı ekspirasyon basıncını ayarlayabilirsiniz. Eğer bu işlev seçilemiyorsa, doktor veya yetkili satıcı tarafından kullanımına izin verilmelidir.
softSTOP zamanı T	Doktor veya yetkili satıcı tarafından öngörölmüş değer çerçevesinde 5 dakikalık adımlar halinde ayarlanabilir (örn. 5 dk ile azami 45 dk arasında).	Burada, solunum basıncının softSTOP işlevi çerçevesinde düşürüleceği zaman aralığını ayarlayabilirsiniz. Eğer bu işlev seçilemiyorsa, doktor veya yetkili satıcı tarafından kullanımına izin verilmelidir.

5.2.5 Hasta menüsü - Rapor (kullanım verileri)

Müteakip tabloda, bu menüdeki parametreler ile ilgili bilgiler bulacaksınız. Menüde gezinmek için diğer bilgiler: [Bakınız "5.1 Cihaz dâhilinde gezinmek", Sayfa 28.](#)

PARAMETRE	AÇIKLAMA
Uyarı listesi	Gerçekleşmiş uyarıları listeler.
Olay listesi	Gerçekleşmiş olayları listeler.
Uyarı listesi / Olay listesi	Gerçekleşmiş uyarıları ve olayları kronolojik sıraya göre listeler.
Eğilimler	Eğer eğilimlerin kullanımına uzman menüsü üzerinden izin verildiyse eğilimlere erişim.

PARAMETRE	AÇIKLAMA
Parametrelere genel bakış	Solunum programlarının ayarlanmış parametrelerini listeler.
Cihaz kullanımı	Cihazın kullanım süresini listeler.
Cihaz durumu	Burada aşağıdaki bilgileri bulacaksınız: <ul style="list-style-type: none">• Cihazın ismi• Seri numarası• Firmware sürümü• Aküye (eğer varsa) ait bilgiler• PIC*• Son iletme tarihi*• ID kodu* *sadece bir modem bağlı olduğunda mevcuttur.

6 Hijyenik hazırlama

UYARI

Cihazın tekrarlanan kullanımı halinde enfeksiyon tehlikesi söz konusu olabilir!

Cihazın birden fazla hastada kullanılması halinde, bir hastadan başka bir hastaya enfeksiyon bulaşması söz konusu olabilir.

- ⇒ Tek kullanımlık ürün, tekrar kullanmayınız.
- ⇒ Birden fazla hastada kullanılması halinde bakteri filtresi kullanınız.

UYARI

Mikrop bulaşmış veya enfeksiyon söz konusu olan hortum sisteminden kaynaklanan yaralanma tehlikesi!

Mikrop bulaşmış veya enfeksiyon söz konusu olan bir hortum sistemi, bir sonraki hastaya mikrop veya enfeksiyon bulaşmasına neden olabilir.

- ⇒ Tek kullanımlık hortum sistemlerini yeniden kullanmak için hazırlama işlemine tabi tutmayınız.
- ⇒ Çok kez kullanılabilen hortum sistemlerini düzgün bir hijyenik hazırlama işleminden geçiriniz.

6.1 Genel bilgiler

- Dezenfeksiyon işlemi esnasında uygun koruyucu donanım kullanınız.
- Kullanılan dezenfeksiyon maddesinin kullanma talimatını dikkate alınız.
- Terapi cihazı yetkili bir satıcı tarafından hijyenik açıdan yeniden kullanıma hazırlandıktan sonra başka hastalarda da kullanıma elverişlidir.

6.2 Süreler

SÜRE	YAPILACAK İŞ
Haftada bir	Cihazı temizleyiniz (bakınız "6.3.1 Cihazın ve bileşenlerinin temizlenmesi", Sayfa 34).
Ayda bir	Hava filtresini temizleyiniz (bakınız "6.4 Hava filtresinin (gri filtre) temizlenmesi", Sayfa 36). Polen filtresini değiştiriniz (bakınız "6.5 Polen filtresinin (beyaz filtre) değiştirilmesi", Sayfa 36).
Her 6 ayda bir	Hava filtresini değiştiriniz.
Her 12 ayda bir	Hortum sistemini değiştiriniz.

SÜRE	YAPILACAK İŞ
Hasta değişiminde	Cihazı yeniden kullanmadan önce, yetkili satıcı tarafından hijyenik hazırlama işlemleri yapılmasını sağlayınız veya genişletilmiş hijyenik hazırlama işlemleri uygulayınız (bakınız "6.3.2 Hasta değişiminde genişletilmiş hijyenik hazırlık işlemleri" , Sayfa 35).

6.3 Cihazın hijyenik hazırlanması

⚠ DİKKAT

Elektrik çarpmasından kaynaklanan yaralanma tehlikesi!

Cihazın içine sızan sıvılar kısa devreye yol açabilir, kullanıcıyı yaralayabilir ve cihaza zarar verebilir.

- ⇒ Cihazın hijyenik açıdan hazırlanmasından önce elektrik beslemesine bağlantısı ayrılmalıdır.
- ⇒ Cihazı ve bileşenlerini sıvıların içine daldırmayınız.
- ⇒ Cihazın ve bileşenlerinin üzerine sıvı dökmeyiniz.

DUYURU

Cihazın içine sızan sıvılar maddi hasara yol açabilir!

Cihazın içine sızan sıvılar cihaza zarar verebilir.

- ⇒ Hortum sistemini sadece tamamen kuru olduğunda kullanınız.



Eğer ısıtılabilen bir hortum sistemi veya aktif ekspirasyon valfli olan bir hortum sistemi kullanıyorsanız, ilgili kullanma talimatını dikkate alınız.

6.3.1 Cihazın ve bileşenlerinin temizlenmesi

1. Cihazı ve bileşenlerini aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde temizleyiniz:

PARÇA	TEMİZLENMESİ
Cihaz çıkışı / girişi dahil cihaz, elektrik bağlantı kablosu	Nemli bez ile siliniz: Su veya keskin olmayan sabun kullanınız.
Gövdedeki çok parlak yüzeyler	Nemli bez ile siliniz: Su veya keskin olmayan sabun kullanınız; mikrofiber bez kullanmayınız.
Kaçak hortum sistemi	Durulanması: Sıcak su ve keskin olmayan sabun kullanınız. Tamamen kurumasını bekleyiniz.
Tek hortumlu valf sistemi	
Ağızlıklı solunum için hortum sistemleri	

PARÇA	TEMİZLENMESİ
Isıtılabilen hortum sistemleri	Üreticinin kullanma talimatını dikkate alınız. Uygulamada ya da hazırlamada hasar olmasını önleyiniz, özellikle de bağlantı kablosunda ve ısıtma telinin üst tarafındaki iç koruyucu folyoda.
Maske	Üreticinin kullanma talimatını dikkate alınız.

- İşlev kontrolü (bakınız "6.6 İşlev kontrolü", Sayfa 36) yapınız.


6.3.2 Hasta değişiminde genişletilmiş hijyenik hazırlık işlemleri

- Hava filtresini, polen filtresini ve bakteri filtresini değiştiriniz.
- Cihazı ve bileşenlerini aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde hijyenik hazırlama işlemlerine tabi tutunuz:

PARÇA	DEZENFEKSİYON	STERİLİZASYON
Cihaz çıkışı / girişi dahil cihaz, elektrik bağlantı kablosu Gövdedeki çok parlak yüzeyler	Silerek dezenfeksiyon (öneri: terralin® protect veya perform advanced Alcohol EP)	Müsaade edilmez
Kaçak hortum sistemi	Daldırma usulü dezenfeksiyon (Öneri: gigasept FF®). Hortum sistemini duru su ile durulayınız ve iyice sallayıp suyunu gideriniz. Hortum sistemini kurutunuz.	Müsaade edilmez
Tek hortumlu valf sistemi	Tekrar kullanım için uygun değildir. İlgili kullanma talimatını dikkate alınız.	Müsaade edilmez
Ağızlıklılı solunum için hortum sistemleri		
Isıtılabilen hortum sistemleri	Üreticinin kullanma talimatını dikkate alınız. Uygulamada ya da hazırlamada hasar olmasını önleyiniz, özellikle de bağlantı kablosunda ve ısıtma telinin üst tarafındaki iç koruyucu folyoda.	
Maske	Üreticinin kullanma talimatını dikkate alınız.	


- İşlev kontrolü (bakınız "6.6 İşlev kontrolü", Sayfa 36) yapınız.

6.4 Hava filtresinin (gri filtre) temizlenmesi

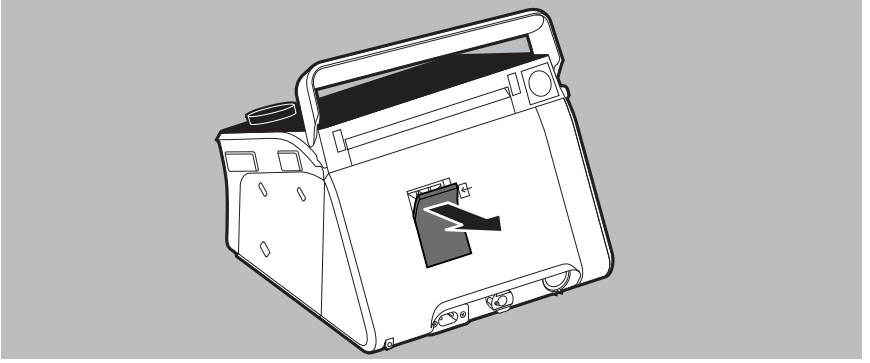

1. Hava filtresini musluktan akan su altında temizleyiniz.
2. Hava filtresinin kurumasını bekleyiniz.

6.5 Polen filtresinin (beyaz filtre) değiştirilmesi

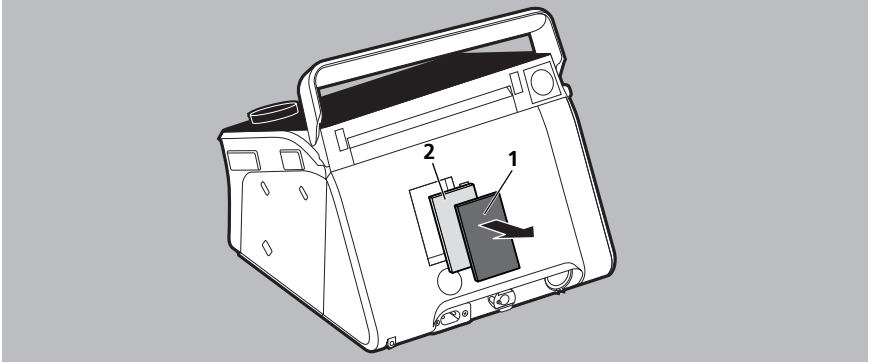


1. Hava filtresini **1** çıkarınız.
2. Beyaz polen filtresini **2** değiştiriniz.
3. Hava filtresini **1** tekrar tutucu düzene takıp yerleştiriniz.

6.6 İşlev kontrolü

Her hijyenik hazırlama işleminden sonra ve her bakım ve onarım çalışmasından sonra, keza en az her 6 ayda bir işlev kontrolü yapınız.

1. Cihazda dıştan görünen hasar durumunu kontrol ediniz.
2. Fişin ve kablunun dıştan görünen hasar durumunu kontrol ediniz.




3. Bileşenlerin cihaza doğru bağlandığını kontrol ediniz.
4. Cihazı elektrik beslemesine bağlayınız (bakınız "4.1 Cihazın Konumlandırılması", Sayfa 17).
5. softSTART gerekirse iptal edilmelidir (bakınız "4.9 softSTART işlevinin açılması ve kapatılması", Sayfa 25).
6. Cihazı devreye sokunuz.
7. Hortum sistemini kapatınız.
8. Ekranda gösterilen basıncı öngörülen basınç ile karşılaştırınız.
9. Alarm işlevini kontrol etmek için:
 - Devreye sokarken alarm onaylama tuşunun  önce sarı ve sonra kırmızı yanmasına dikkat ediniz.
 - Hortum sistemini cihazdan çekip çıkarınız. Bağlantısızlık alarmı verilir ve bir uyarı sesi duyulur.
10. Eğer dâhili bir akü mevcut ise:
 - Cihazı elektrik şebekesi beslemesinden ayırınız. Bir alarm sesi duyulur. Elektrik akımı beslemesini akü üstlenir.
 - Cihazı elektrik şebekesi beslemesine bağlayınız. Elektrik şebekesi besleme göstergesi yeşil yanar.
11. Eğer kontrol ettiğiniz noktalardan bir olması gerektiği gibi değilse veya basınç sapması > 1 hPa ise: Cihazı kullanmayınız ve yetkili satıcıya başvurunuz.

7 Alarmlar ve arızalar

İki tür uyarı mevcuttur: Fizyolojik uyarılar hastanın solunumu ile ilişkilidir. Teknik uyarılar ise cihazın konfigürasyonu ile ilgilidir.

Cihaz teslim edildiğinde veya sıfırlandığında, yani reset edildiğinde tüm fizyolojik alarmlar devre dışı edilmiştir. Teknik uyarılar etkindir ve konfigüre edilemez.

7.1 Uyarıların gösterilme sıralaması

Alarmlar üç öncelik kademesine ayrılır: düşük , orta  ve yüksek .

Birden fazla uyarı aynı zamanda devreye girerse, önce daima önceliği en yüksek olan uyarı gösterilir.

Daha düşük önceliğe sahip uyarı kayıtlı kalır ve daha yüksek öncelikli uyarı sebebi giderildikten sonra, yine gösterilir.




7.2 Fizyolojik alarmların devre dışı bırakılması

UYARI

Alarmlar deaktifleştirilirse veya ses kapatılırsa hasta için yaralanma tehlikesi söz konusu olur!

Alarmların deaktifleştirilmesi veya sesin kapatılması hastayı tehlikeye sokabilir.

- ⇒ Sadece hastanın durumu açısından tehlike yaratmayan alarmları deaktifleştiriniz veya sesini kapatınız.
- ⇒ Uyarı seslerinin şiddetini uyarı sesi duyulacak kadar yüksek ayarlayınız.

Hangi fizyolojik alarmların **Ventilasyon** menüsünde aktifleştirileceğine , deaktifleştirileceğine  veya sesinin kapatılacağına  tedaviyi yapan doktor olarak siz karar verebilirsiniz.

Seçilmiş solutma moduna göre farklı uyarılar konfigüre edilebilir.



DİKKAT

Açıklanamayan alarmlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Açıklanamayan veya anlamsız alarmlar, cihazın bir alarmı uygulamasını önleyebilir ve böylelikle hasta açısından tehlike oluşabilir. Bu cihaz yaşamı destekleyici solutma uygulaması için **öngörülmemiştir**.

- ⇒ Alarmları anlamlı olacak şekilde ayarlayınız.

7.3 Uyarıların sessiz konuma alınması








1. Alarmın 120 saniye sessiz konuma alınması: Alarm onaylama tuşuna  basınız. Arıza, durum satırında gösterilmeye devam eder ve arıza giderilinceye kadar alarm onaylama tuşu yanıp söner.
2. Tüm akustik alarm sinyallerinin 2 dakika sessiz konuma alınması: Alarm onaylama tuşuna  uzun basınız.

7.4 Fizyolojik alarmlar

GÖSTERGE	NEDENİ	ÖNLEM
Apne 	Ayarlanmış süre içerisinde spontane solunum yok.	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
Basınç yüksek 	Maksimum basınç aşıldı.	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
Basınç düşük 	Asgari tedavi basıncının altına düşüldü.	Pislenmiş filtreyi temizleyiniz ya da değiştiriniz.
	Soluma girişi sızdırıyor.	Soluma girişini yeniden ayarlayınız.
	Soluma girişi arızalı.	Soluma girişini değiştiriniz.
Ayarlar uygun değil.	Ayarlar uygun değil.	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
Frekans yüksek 	Azami solunum frekansı aşıyor.	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
Frekans düşük 	Asgari solunum frekansının altına düşülüyor.	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
Kaçak yüksek 	Sızıntı	Cihazdan, hortum sistemi üzerinden hastadaki soluma girişine kadar giden bağlantıyı kontrol ediniz.
Dakika volüm yüksek 	Azami dakika volüm değeri aşıldı.	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
Dakika volüm düşük 	Asgari dakika volüm değerinin altına düşüldü.	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
Nabız yüksek 	Solunum parametrelerinin ayarları uygun değil (hastanın nabız frekansı üst uyarı ayarı aşılmıştır).	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
	Alarm ayarları uygun değil	









GÖSTERGE	NEDENİ	ÖNLEM
Nabız düşük 	Uyarı ayarları anlamlı değil (hastanın nabız frekansı alt uyarı ayarının altına düşmüştür).	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
SpO ₂ yüksek 	Hastanın oksijen doygunluğunun üst uyarı ayarı aşılmıştır.	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
SpO ₂ düşük 	Soluma girişi hatalı veya arızalı.	Soluma girişini kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz.
	Oksijen girişi hatalı veya çok düşük.	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
	Solunum parametrelerinin ayarları uygun değil.	
	Uyarı ayarları anlamlı değil (hastanın oksijen saturasyonu alt uyarı ayarının altına düşmüştür).	
Tidal volüm yüksek 	Hortum sisteminde kaçak	Kaçığı arayınız ve gideriniz. Gerekli olması halinde: Hortum sistemini değiştiriniz.
	Hasta birlikte soluyor.	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
Tidal volüm düşük 	Filtre pislenmiş.	Filtreyi temizleyiniz ya da değiştiriniz.
	Soluma girişi sızdırıyor veya bozuk.	Başlığı/kafa bandını, soluma girişi sızdırmaz olarak yerleşecek şekilde ayarlayınız. Gerekirse yenileyiniz.
	Soluma girişi arızalı.	Soluma girişini değiştiriniz.
	Ayarlar anlamlı değil (tidal volümün alt uyarı ayarlarının altına düşmüştür).	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
	MPVv modunda asgari hacme belirlenmiş süre içinde ulaşmıyor.	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
Sadece prisma VENT50 ve prisma VENT50-C		
ARP sınırı 	Hasta ve cihaz senkron değil.	Cihaz ayarları kontrol edilmelidir.


7.5 Teknik uyarılar

GÖSTERGE	NEDENİ	ÖNLEM
Servis gerekiyor. Lütfen yetkili satıcınız / danışmanınız ile irtibata geçiniz.	Sadece yetkili ve ehliyetli satıcı tarafından giderilebilecek bir teknik hata söz konusudur.	Cihazın onarılmasını sağlayınız.
Akü bozuk. Servis gerekiyor. 	Akü bozuk. Cihaz bozuk.	Akünün değiştirilmesini sağlayınız. Cihazın onarılmasını sağlayınız.
Akü mevcut değil. Servis gerekiyor. 	Akü bozuk. İzin verilmeyen bir akünün kullanılması.	Cihazın onarılmasını sağlayınız.
Akü kapasitesi çok kritik 	Akü boş (bakiye kapasite %5'in altında)	Cihazı elektrik şebekesi beslemesine bağlayınız.
Akü kapasitesi kritik 	Akü boş (bakiye kapasite %10'in altında).	Cihazı elektrik şebekesi beslemesine bağlayınız.
Akü ısınan dolayı kapandı 	Akü çok sıcak.	Cihazı 5 °C ila 40 °C arasında bir çevre ısı derecesinde çalıştırınız.
Kullanım ömrü tamamlandı. Akünün değiştirilmesini sağlayınız 	Akünün kullanım ömrü tamamlandı.	Akünün değiştirilmesini sağlayınız.
Akü ısı derecesi yüksek 	Akü çok sıcak.	Cihazı 5 °C ila 40 °C arasında bir çevre ısı derecesinde çalıştırınız.
Akü tanınmadı. Servis gerekiyor 	Akü bozuk. Cihaz bozuk.	Akünün değiştirilmesini sağlayınız. Cihazın onarılmasını sağlayınız.



GÖSTERGE	NEDENİ	ÖNLEM
Emme bölgesinin önü kapalı. Lütfen emme bölgesinin önünü serbest tutunuz. 	Emme bölgesinin önü kapalı.	Emme bölgesinin önünü serbest tutun.
Sürekli bağlantısızlık; solunum hortumunu ve hasta bağlantısını kontrol ediniz 	Hortum sistemi cihaza doğru bir şekilde bağlı değil veya hiç bağlanmamış. Cihaz, açık durumdaki (monte edilmemiş) soluma girişi ile çalıştırılıyor.	Cihazdan, hortum sistemi üzerinden hastadaki soluma girişine kadar giden bağlantıyı kontrol ediniz.
Geri soluma 	Hasta valfi ekspirasyonda açılmıyor (örn. ilaçlardan dolayı yapışmış). Yüksek frekansta hastanın geri soluma hacmi çok yüksek.	Hortum sistemini kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz
Hortum sistemi hatası 	Valf kontrol hortumu ve basınç ölçme hortumu karıştırılmış. Valf kontrol hortumu katlanmış.	Hortum yerleşimini kontrol ediniz. Valf kontrol hortumunun bloke olmadığını kontrol ediniz.
Hortum sistemi hatası 	Cihaz ve hasta valfi arasındaki valf kontrol hortumu hatalı bağlanmış. Valf kontrol hortumu ve basınç ölçme hortumu karıştırılmış. Valf kontrol hortumu katlanmış.	Valf kontrol hortumunda hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekli olması halinde: Hortum sistemini değiştiriniz. Valf kontrol hortumunu doğru bağlayınız. Hortum yerleşimini kontrol ediniz. Valf kontrol hortumunun bloke olmadığını kontrol ediniz.
Kaçak az 	Ekspirasyon kaçak sistemi mevcut değil.	Ekspirasyon kaçak sistemini bağlayınız.
Fanda aşırı ısınma 	Fan ısı derecesi çok yüksek. Soğutma havası filtresi kapalı.	Soğutma havası filtresini kontrol ediniz. Gerekli olması halinde: Soğutma havası filtresini yetkili bir satıcının değiştirmesini sağlayınız.

GÖSTERGE	NEDENİ	ÖNLEM
Terapi sonlandırıldı 	Cihaz kapalı. softSTOP ile terapi sonu, cihaz kapatılmıştır.	Cihazı tekrar açınız.
Bağlantı kesilmesi. Solunum hortumunu ve hasta bağlantısını kontrol ediniz 	Hortum sistemi cihaza doğru bir şekilde bağlı değil veya hiç bağlanmamış.	Cihazdan, hortum sistemi üzerinden hastadaki soluma girişine kadar giden bağlantıyı kontrol ediniz.
	Cihaz, açık durumdaki (takılmamış) soluma girişi ile kullanılıyor	
Kapak takınız veya solunum havası nemlendiricisini bağlayınız. 	Eksik veya bozuk kapak / solunum havası nemlendiricisi nedeniyle kaçak.	Kapağın bağlantısını veya solunum havası nemlendiricisi bağlantısını kontrol ediniz.
	Mevcut olmayan veya bozuk kapak / solunum havası nemlendiricisi nedeniyle kaçak söz konusudur.	Kapağın veya solunum havası nemlendiricisinin cihaza bağlantısını kontrol ediniz. Alarm yine de güncel kalıyorsa: Cihazın onarılmasını sağlayınız.
Solunum hortumu veya cihaz çıkışı bloke olmuş 	Hortum sistemi katlanmış veya bloke olmuş.	Hortum sisteminin veya cihaz çıkışının bloke olmadığını kontrol ediniz.
Hortum sistemi hatası 	Tek hortumlu valf sistemi seçilmiştir. Tek hortumlu valf sistemi bağlanmamıştır.	Hortum yerleşimini kontrol ediniz. Gerekli olması halinde: Solunum hortumunu değiştiriniz. Hortum sistemini değiştiriniz.
	Kaçak hortum sistemi seçilmiş, tek hortumlu valf sistemi bağlanmıştır.	Ayarları tedavi eden doktora kontrol ettiriniz.
	Basınç ölçme hortumu doğru bağlanmamış.	Hortum yerleşimini kontrol ediniz.
SpO ₂ ölçümü hatalı 	SpO ₂ sensörü bozuk.	SpO ₂ sensörünü değiştiriniz. Alarm yine de güncel kalıyorsa: Modülü değiştiriniz.
	SpO ₂ sensörü doğru bağlanmamış.	SpO ₂ sensörünü doğru bağlayınız. Alarm yine de güncel kalıyorsa: SpO ₂ sensörünü değiştiriniz.

GÖSTERGE	NEDENİ	ÖNLEM
SpO ₂ sensörü bağlanmamış 	Herhangi bir SpO ₂ sensörü bağlanmamış.	SpO ₂ sensörünü bağlayınız. Alarm yine de güncel kalıyorsa: Modülü değiştiriniz.
SpO ₂ sinyali zayıf 	SpO ₂ sensörü parmağa doğru bağlanmamış.	Parmağa olan bağlantıyı kontrol ediniz.
	Sinyal, oje veya pislikten dolayı arızalı.	Ojeyi silip gideriniz. Parmağı temizleyiniz.
Akü aşırı ısıdan dolayı şarj etmiyor 	Akü çok sıcak.	Cihazı 5 °C ila 40 °C arasında bir çevre ısı derecesinde çalıştırınız.
Dahili akü düşük ısı derecesinden dolayı şarj edilmiyor 	Akü çok soğuk.	Cihazı 5 °C ila 40 °C arasında bir çevre ısı derecesinde çalıştırınız.
Akünün şarj edilemiyor. Servis gerekiyor 	Akü bozuk.	Akünün değiştirilmesini sağlayınız.
Modül prismaCONNECT bozuk. Lütfen yetkili satıcınız / danışmanınız ile irtibata geçiniz 	Modül prismaCONNECT bozuk.	Modülün değiştirilmesini sağlayınız.
Modül prisma CHECK mevcut değil. 	Modül prisma CHECK bozuk veya bağlı değil.	Modülün değiştirilmesini sağlayınız veya doğru bağlayınız.
Saat ayarlanmamış. 	Dâhili saat ayarlanmamış.	Terapi akışının düzgün kaydedilebilmesi için saatin yetkili bir satıcı tarafından ayarlanmasını sağlayınız.

GÖSTERGE	NEDENİ	ÖNLEM
Cihaz akü modunda! 	Elektrik şebekesi beslemesi devre dışı oldu.	Elektrik bağlantı kablosunun güvenli şekilde bağlı olup olmadığını kontrol ediniz. Elektrik prizinin işlevini kontrol ediniz.
	Cihaz akü moduna alındı.	Alarm onaylama tuşuna basınız. Cihaz akü modundadır.
Ekran kapandı. Asgari 120 saniye akustik ve optik sinyal, ekran göstergesi yok.	Elektrik şebekesi devre dışı ve akü (eğer varsa) deşarj olmuş.	Elektrik bağlantı kablosunun güvenli şekilde bağlı olup olmadığını kontrol ediniz. Elektrik prizinin işlevini kontrol ediniz. Eğer akü varsa: Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız ve aküyü şarj ediniz.
	Cihaz bozuk.	Cihazın onarılmasını sağlayınız.

SADECE HFT MODU

Akış sağlanamadı. FiO ₂ kontrol edilmelidir, akış ayarları veya aksesuar değiştirilmelidir. 	Ayarlanmış Akış uygulanamaz.	Üst akış sınırı: Daha düşük bir HFT akış ayarlayınız ve O ₂ beslemesini uygun ayarlayınız veya daha düşük dirence sahip aksesuar kullanınız.
		Alt akış sınırı: Daha yüksek bir HFT akış ayarlayınız ve O ₂ beslemesini uygun ayarlayınız veya daha yüksek dirence sahip bir aksesuar kullanınız.
prismaAQUA bağlanmamış Uygun bir harici nemlendirici kullanılmalıdır. 	prismaAQUA HFT modunda kullanılamaz.	prismaAQUA ünitesini terapi cihazından ayırınız ve HFT uyumlu harici nemlendiriciyi bağlayınız.

7.6 Arızalar

ARIZA / ARIZA MESAJI	NEDENİ	GIDERİLMESİ
Çalışma sesi yok, ekranda hiçbir şey gösterilmiyor.	Elektrik akımı beslemesi mevcut değil.	Elektrik bağlantı kablosunun güvenli şekilde bağlı olup olmadığını kontrol ediniz. Elektrik prizinin işlevini kontrol ediniz.
Bir nefes alıp verme yoluyla terapi başlatılmıyor.	Otomatik başlatma (Autostart) işlevi etkinleştirilmemiştir.	Otomatik başlatma (Autostart) işlevini etkinleştiriniz.
Cihaz ayarlanmış hedef basınca ulaşmıyor.	Hava filtresi pislenmiştir.	Hava filtresini temizleyiniz. Gerekli olması halinde: Filtreyi değiştiriniz (bakınız "6 Hijyenik hazırlama", Sayfa 33).
	Solunum maskesi hava kaçırıyor.	Kafa bandını, maske yüzü sızdırmaz bir şekilde oturacak şekilde ayarlayınız. Gerekli olması halinde: Bozuk maskeyi değiştiriniz.
	Hortum sistemi optimum şekilde algılanmamıştır.	Hortum testi yapınız.

8 Bakım

8.1 Güvenlik bilgi ve uyarıları

UYARI

Değişiklik yapılmış ME cihazı sonucunda yaralanma tehlikesi!

ME cihazında izinsiz değişiklik yapılması hastayı tehlikeye sokabilir.

- ⇒ Cihazda üreticinin izni olmadan değişiklik yapmayınız.
- ⇒ Cihazda değişiklik yapılırsa, cihazın güvenli kullanılmasına devam edilebilmesi için uygun kontroller ve incelemeler yapılmalıdır.

8.2 Genel bilgiler

- Cihazda ancak herhangi bir hasta bağlı değilken bakım çalışmaları yapınız.
- Onarım, bakım ve koruyucu bakım ya da denetim çalışmaları ve cihazda değişiklikler yapılması gibi önlemlerin sadece üretici firma veya bu firma tarafından açık bir şekilde yetkilendirilmiş bir uzman personel tarafından yapılmasını sağlayınız.
- Cihazın kullanım ömrü 6 yıl olarak tasarlanmıştır. Amacına uygun kullanım halinde bu cihazın kullanım ömrü boyunca bakıma ihtiyacı yoktur. Cihazın kullanım ömrü sona erdikten sonra da kullanılması halinde, yetkili bir yetkili satıcı tarafından kontrol edilmesi gerekir.
- Almanya için: Bu cihaz, §11 Tıbbi Ürünler İşletme Düzenlemesi gereğince her 2 yılda bir teknik güvenlik kontrolüne (STK) tabi tutulmalıdır. Tüm diğer ülkeler için ilgili ülkelere özel talepler ve kurallar geçerlidir.
- Eğer cihazın bir aküsü varsa, bu akünün her 4 yılda bir değiştirilmesi gerekmektedir.

9 Taşıma ve depolama

Cihazı öngörülmuş çevre koşullarında depolayınız ve taşıyınız. Cihazı depolama işleminden önce temizleyiniz.

Eğer cihazın içine monte edilmiş ve her zaman kullanıma hazır olması gereken dâhili bir akü varsa, cihazı elektrik şebekesine bağlı durumda bırakınız. Böylelikle akünün sürekli tam olarak şarj edilmiş olması sağlanır.

Cihaz uzun bir süre elektrik şebekesine bağlanmazsa, akü deşarj olur. Akünün şarj durumunu düzenli olarak kontrol etmenizi ve (gerekirse) cihaz yardımıyla aküyü şarj etmenizi öneriyoruz.

10 Giderilmesi ya da imha edilmesi



Ürünü ve mevcut aküleri evsel atıklar üzerinden imha etmeyiniz ya da gidermeyiniz. Ürünün uzmanca ve kurallara uygun şekilde giderilmesi veya imha edilmesi için yetkili ve sertifikalı bir elektronik hurda toplama ve değerlendirme işletmesine başvurunuz. Böyle bir toplama ve değerlendirme işletmesinin adresini ilgili çevre koruma yetkililerinden veya bağlı bulunduğunuz belediyeden öğrenebilirsiniz. Cihaz ambalajını (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kâğıt olarak giderebilir ya da imha edebilirsiniz.

11 Ek

11.1 Teknik veriler

11.1.1 Cihaz

ÖZELLİKLER	CIHAZ prisma VENT30, prisma VENT30-C, prisma VENT40 prisma VENT40-C	CIHAZ prisma VENT50 prisma VENT50-C
Tıbbi cihaz yönetmeliği MDR (AB) 2017/745 uyarınca ürün sınıfı	IIa	
Ebatlar G x Y x D [cm]	21,8 x 17,5 x 21,8	
Ağırlık	2,4 kg	2,5 kg
Dâhili akünün (eğer varsa) ağırlığı	0,63 kg	
Isı derecesi aralığı - Çalıştırma - Taşıma ve depolama - +70 °C ortamda taşıma ve depolama - -25 °C ortamda taşıma ve depolama	+5 °C ila +40 °C -25 °C ila +70 °C Çalıştırmaya başlamadan önce 4 saat oda sıcaklığına kadar soğuması beklenmelidir. Çalıştırmaya başlamadan önce 4 saat oda sıcaklığına kadar ısınması beklenmelidir.	
Çalıştırma, taşıma ve depolama için izin verilen nem oranı	Bağıl %10 ila %95 arasında nem, yoğuşmasız	
Hava basıncı aralığı	600 hPa ila 1100 hPa, bu değer deniz seviyesinden 4000 m yüksekliğe Deniz seviyesi (700 hPa'nın altındaki basınçlarda kaçaklar küçük tutulmalıdır, çünkü çok yüksek solunum basınçlarında cihaz kaçakları muhtemelen dengeleyemez)	
Hortum sistemi bağlantı çapı	ISO 5356-1 standartına göre norm koni 22 mm	
20 hPa değerinde azami hava akışı	>220 l/dk.	
Elektrik bağlantısı	100-240 V AC, 50-60 Hz, Tolerans -%20 - %10	
Azami yük durumunda çekilen ortalama elektrik akımı	100 V'da: 1,02 A 240 V'da: 0,43 A	100 V'da: 1,12 A 240 V'da: 0,5 A
Azami elektrik gücü	100 W	120 W

ÖZELLİKLER	CIHAZ prisma VENT30, prisma VENT30-C, prisma VENT40 prisma VENT40-C	CIHAZ prisma VENT50 prisma VENT50-C
Dâhili akü (eğer varsa) - Tipi - Nominal kapasitesi - Nominal gerilim - Nominal güç - Tipik deşarj olma döngüleri	Li-lyon 3100 mAh 39,6 V 121 Wh 600 şarj döngüsü	
Müteakip ayarlarda dâhili akünün kullanım süresi: T modu, f = 20 /dk, Ti = 1 s, PEEP = 4 hPa, Vt = 800 ml Pasif akciğer: Direnc R = 5 hPa (l/s); Uyma (Compliance) C = 50 ml/hPa	> 12 saat	
Akünün şarj süresi	> 8 saat	
İnverter ile ilişkili elektrik bağlantısı	12 V DC / 24 V DC azm. 10 VA	
IEC 60601-1-11 standardına göre sınıflandırma: Elektrik çarpmasına karşı koruma türü Hasta bağlantılı uygulama parçası sınıflandırması İçine zarar verici katı madde ve su girmesine karşı koruma	Koruma sınıfı II Tip BF IP22	
IEC 60601-1 standardına göre sınıflandırma: Çalıştırma şekli	Sürekli çalışma	
Uygulama kısmı	Cihaz çıkışı, solunum maskesi, SpO ₂ sensörü	

ÖZELLİKLER	CIHAZ prisma VENT30, prisma VENT30-C, prisma VENT40 prisma VENT40-C	CIHAZ prisma VENT50 prisma VENT50-C
IEC 60601-1-2 uyarınca Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Girişim bastırma Radyo paraziti bağıışıklığı	Tıbbi elektrikli cihazlar yayılım ve parazitlenme direnci açısından sadece belirlenmiş bir elektromanyetik ortamda kurulup işletmeye alınmalıdır. Daha detaylı bilgiler, kontrol parametreleri ve sınır değerler gerektiğinde üreticiden talep edilebilir. EN 55011 B IEC 61000-4 Bölüm 2 - 6, Bölüm 11, Bölüm 8 IEC 61000-3 Bölüm 2 ve 3	
Solunum havasının ısıtılması	Azami + 3 °C	
ISO 80601-2-70 standardına göre ortalama ses basınç seviyesi / Çalışma halinde	10 hPa değerinde yakl. 26 dB(A) (34 dB(A) ses şiddeti seviyesine denk gelir)	10 hPa değerinde yakl. 28 dB(A) (36 dB(A) ses şiddeti seviyesine denk gelir)
Solunum havası nemlendiricisiyle ISO 80601-2-70 standardına göre ortalama ses basınç seviyesi / Çalışma halinde	10 hPa değerinde yakl. 27 dB(A) (35 dB(A) ses şiddeti seviyesine denk gelir)	10 hPa değerinde yakl. 28 dB(A) (36 dB(A) ses şiddeti seviyesine denk gelir)
IEC 60601-1-8 standartına göre tüm uyarı koşulları için ses basınç seviyesi uyarı mesajı (yüksek, orta, düşük öncelik)	Kademe 1: 63 dB(A) Kademe 2: 66 dB(A) Kademe 3: 68 dB(A) Kademe 4: 80 dB(A) ±5 dB(A)	
IPAP basınç aralığı prisma VENT30, prisma VENT30-C prisma VENT40, prisma VENT40-C prisma VENT50, prisma VENT50-C Tolerans	4 hPa ila 30 hPa 4 hPa ila 40 hPa 4 hPa ila 50 hPa ±1,2 hPa (ayar değerinin ±%8 kadarı)	
PEEP basınç aralığı Tolerans	4 hPa ila 25 hPa ±1,2 hPa (ayar değerinin ±%8 kadarı)	Kaçak hortum sistemi: 4 hPa ila 25 hPa Tek hortumlu valf sistemi: 0 hPa ila 25 hPa ±1,2 hPa (ayar değerinin ±%8 kadarı)

ÖZELLİKLER	CIHAZ prisma VENT30, prisma VENT30-C, prisma VENT40 prisma VENT40-C	CIHAZ prisma VENT50 prisma VENT50-C
CPAP Çalıştırma basıncı aralığı Tolerans	4 hPa ila 20 hPa $\pm 1,2$ hPa (ayar değerinin ± 8 kadarı)	
Basınç artımı	0,2 hPa	
PLSmin (asgari sabit sınır basınç) Hata durumundaki asgari basınç	0 hPa	
PLSmax (azami sabit sınır basınç) Hata durumundaki azami basınç	≤ 60 hPa	
PWmax (azami tedavi basıncı) prisma VENT30, prisma VENT30-C prisma VENT40, prisma VENT40-C prisma VENT50, prisma VENT50-C	30 hPa, basınç regülasyonu 40 hPa, basınç regülasyonu 50 hPa, basınç regülasyonu	
PWmin (asgari tedavi basıncı)	Kaçak sistemi: 4 hPa; basınç regülasyonu Valf sistemi: 0 hPa	
Solunum frekansı Hassasiyet Artım	0 - 60 bpm $\pm 0,5$ bpm 0,5 bpm	
Ti/Ti max Ti min, Ti max, Ti timed	0,5 s ila 4 s 0,2 s ila 4 s otom (sadece Ti timed)	
Hassasiyet Artım	$\pm 0,1$ s 0,1 sn	
Hedef volüm (prisma VENT30 modelinde değil) Hassasiyet Artım	100 ml ila 2000 ml ± 20 10 ml	
Tetikleme kademesi İnspirasyon Ekspirasyon	1 (yüksek duyarlılık) ila 8 (düşük duyarlılık) Azami akışın %95 ila %5 kadarı, %5 oranında adımlar şeklinde	
Tetikleme düzeni	Hastanın akımı tetikleme eşiğini aşınca, inspirasyon tetikleme başlatılır. İspirasyon hasta akımının azami inspirasyon hasta akımı yüzde oranına düşmesi halinde, ekspirasyon tetikleme başlatılır.	

ÖZELLİKLER	CIHAZ prisma VENT30, prisma VENT30-C, prisma VENT40 prisma VENT40-C	CIHAZ prisma VENT50 prisma VENT50-C
Basınç yükselme hızı	Kademe 1: 100 hPa/sn Kademe 2: 80 hPa/sn Kademe 3: 50 hPa/sn Kademe 4: 20 hPa/sn	
Basınç düşüş hızı	Kademe 1: 100 hPa/sn Kademe 2: 80 hPa/sn Kademe 3: 50 hPa/sn Kademe 4: 20 hPa/sn azm.: Azami yavaş basınç uyumu	
Tidal volüm Tolerans	100 ml ila 2000 ml ± %20	
Dakika volüm (son 5 soluk üzerinden ortalama değer alınır) Tolerans	0 l/dk - 99 l/dk ± %20 (Koşullar: Vt ≥100 ml)	
Oksijen verilmesi işleminde izin verilen azami akış	15 l/dk	
HFT Akış aralığı	5 - 60 l/dk Artım: 1 l/dk	
Polen filtresi 1 µm büyüklüğe kadar 0,3 µm büyüklüğe kadar	Filtre sınıfı E10 ≥ %99,5 ≥ %85	
Polen filtre durma süresi	yakl. 250 saat	
SD kart	Bellek kapasitesi 256 MB - 8 GB olan kartlar kullanılabilir, arabirim SD fiziksel katman sürüm 2.0 ile uyumludur	
Filtre ve eşitleme teknikleri	Fizyolojik uyarılar, uyarı eşliğine erişilmesinden sonraki 3 soluktan sonra başlatılır. İstisna: Nabız yüksek, Nabız düşük, SpO₂ yüksek ve SpO₂ düşük alarmları, alarm eşliğine erişilmesinden 3 saniye sonra devreye sokulur. Geri soluma alarmı, alarm eşliğine erişilmesinden 10 soluk sonra devreye sokulur. ARP sınırı alarmı, alarm eşliğine erişilmesinden azm. 20 soluk sonra devreye sokulur. Basınç, akış ve kaçak göstergeleri düşük geçirgen filtrelendirilmiştir.	

ÖZELLİKLER	CIHAZ prisma VENT30, prisma VENT30-C, prisma VENT40 prisma VENT40-C	CIHAZ prisma VENT50 prisma VENT50-C
Bakteri filtresi	Ölü hacim: 26 ml Debi direnci: 2,0 cm H ₂ O 60 l/dk değerinde	

KULLANILAN ÖLÇME CİHAZLARI İÇİN GEÇERLİ TOLERANSLAR

Basınç:	Ölçüm değerinden \pm %0,75 veya \pm 0,1 hPa
Akış:	Gerçek değerden \pm %2
Volüm	Gerçek değerden \pm %3
Isı derecesi:	\pm 0,3 °C
Süre	\pm 0,05 Hz / \pm 0,001 bpm

Tüm fizyolojik akış ve volüm değerleri BTPS olarak gösterilir (hasta akışı, hedef volüm, soluk hacmi, dakika volüm). Tüm diğer akış ve volüm değerleri STPD olarak gösterilir.

Yapısal değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

Cihazların hiçbir parçasında lateks bulunmamaktadır.

WM110TD ve WM120TD tipi cihazlar aşağıdaki açık kaynak kodlu yazılımları kullanmaktadır: FreeRTOS.org


Bu cihazın yazılımı, Umuma Açık Lisans (GPL) kuralları kapsamına giren kod içermektedir. İlgili kaynak kodunu ve GPL kurallarını talep üzerine alabilirsiniz.

Uygulanmış standartlar

- EN ISO 10651-6: Tıbbi kullanım için solunum cihazları - Önemli performans özelliklerini de içeren, genel güvenlik için belirlenmiş özel kurallar - Parça 6: Solunum desteği için evde mekanik ventilasyon cihazları
- EN ISO 80601-2-79 / EN ISO 80601-2-80 Tıbbi elektrikli cihazlar
 - Parça 2-79: Solunum zorlukları olan hastaların solunum desteği için evde mekanik ventilasyon cihazlarının kullanılmasında temel güvenlik ve esas performans özelliklerine ilişkin özel koşullar.
 - Parça 2-80 (akülü ve inverterli modelde): Solunum yetmezliği olan hastaların solunum desteği için evde mekanik ventilasyon cihazlarının kullanılmasında temel güvenlik ve esas performans özelliklerine ilişkin özel koşullar.


11.1.2 Pnömatik plan

Kaçak hortum sistemi

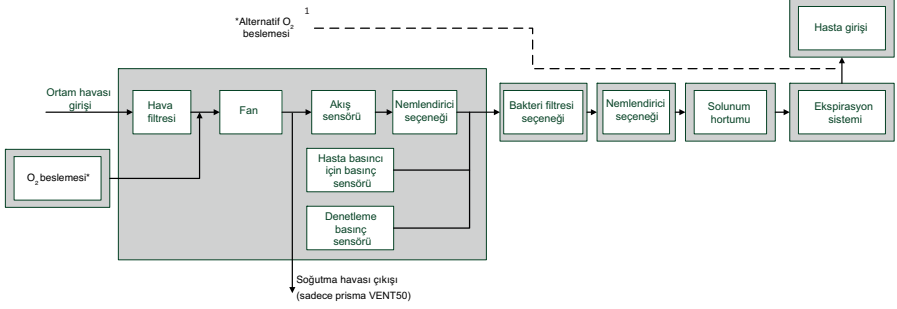

¹ Hortum testi esnasında O₂ beslemesi kapatılmış olmalıdır.

Tek hortumlu valf sistemi

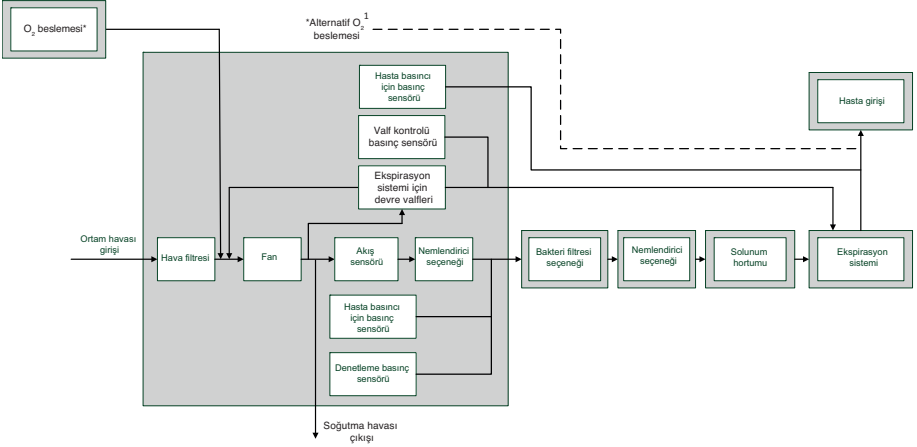

¹ Hortum testi esnasında O₂ beslemesi kapatılmış olmalıdır.

11.1.3 Sistem dirençleri

Flow	prisma VENT30, prisma VENT30-C, prisma VENT40, prisma VENT40-C		prisma VENT50, prisma VENT50-C			
	Ekspirasyon	İnspirasyon	Tek hortumlu valf sistemi		Kaçak hortum sistemi	
22 mm hortum sistemine ve hava nemlendirici cihaza sahip cihaz						
15 l/dk	0,3 hPa	0,4 hPa	0,1 hPa	0,2 hPa	0,3 hPa	0,3 hPa
30 l/dk	0,91 hPa	1,1 hPa	0,4 hPa	0,6 hPa	0,9 hPa	1,0 hPa
60 l/dk	2,98 hPa	3,44 hPa	1,4 hPa	5,1 hPa	2,7 hPa	3,1 hPa
22 mm hortum sistemine (hava nemlendirici cihaz yok) sahip cihaz						
15 l/dk	0,32 hPa	0,42 hPa	0,2 hPa	0,2 hPa	0,4 hPa	0,3 hPa
30 l/dk	0,98 hPa	1,17 hPa	0,5 hPa	0,7 hPa	1,0 hPa	1,0 hPa
60 l/dk	3,19 hPa	3,62 hPa	1,4 hPa	5,7 hPa	3,0 hPa	3,3 hPa
15 mm solunum hortumuna, hava nemlendirici cihaza ve bakteri filtresine sahip cihaz						
15 l/dk	0,44 hPa	0,51 hPa	-	-	-	-
30 l/dk	1,26 hPa	1,35 hPa	-	-	-	-
60 l/dk	3,77 hPa	4,05 hPa	-	-	-	-
15 mm solunum hortumuna (hava nemlendirici cihaz ve bakteri filtresi yok) sahip cihaz						
15 l/dk	-	-	1,1 hPa	1,2 hPa	0,5 hPa	0,3 hPa
30 l/dk	-	-	1,9 hPa	3,3 hPa	1,1 hPa	1,1 hPa
60 l/dk	-	-	3,4 hPa	10,4 hPa	3,4 hPa	3,6 hPa

11.2 Elektromanyetik girişimler

Yönergeler ve üretici beyanı - Elektromanyetik girişimler	
Bu cihaz, sabit ve mobil kullanılabilen bir cihaz olarak, hem ev dahilinde hem de ilgili klinik alanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Ev ortamındaki kullanımda cihaz parazitlenmeye neden olabilir ve bu yüzden uygun önlemler alınması gerekli olabilir, örn. cihaz yönünün ve konumunun değiştirilmesi veya cihazın uygun şekilde siperlenmesi veya bağlantısının konuma karşı filtrelenmesi gibi.	
Girişim ölçümleri	Uygunluk
RF emisyonları CISPR 11	Grup 1
RF emisyonları CISPR 11	Sınıf B
IEC 61000-3-2 uyarınca titreşim emisyonları	Sınıf A
IEC 61000-3-3 uyarınca voltaj dalgalanmaları / titreşim emisyonları	uyumludur

11.3 Elektromanyetik bağışıklık

Yönergeler ve üretici beyanı - Elektromanyetik BAĞIŞIKLIK			
<p>Bu cihaz, sabit ve mobil kullanılabilen bir cihaz olarak, hem ev dahilinde hem de ilgili kliniksel alanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır.</p> <p>Ev ortamındaki kullanımda cihaz parazitlenmeye neden olabilir ve bu yüzden uygun önlemler alınması gerekli olabilir, örn. cihaz yönünün ve konumunun değiştirilmesi gibi.</p>			
BAĞIŞIKLIK kontrolleri	IEC 60601 KONTROL SEVİYESİ	UYGUNLUK SEVİYESİ	ELEKTROMANYETİK ORTAM - Yönerge
IEC 61000-4-2 standartına göre elektrostatik deşarj (ESD)	± 8 kV temas deşarjı ± 15 kV hava deşarjı	± 8 kV temas deşarjı ± 15 kV hava deşarjı	Zeminler odundan veya betondan olmalıdır ya da seramik fayanslar ile kaplanmış olmalıdır. Eğer zemin sentetik malzemeler ile kaplanmış ise, bağıl hava nemi oranı en az % 30 olmalıdır.
IEC 61000-4-4 standartına göre hızlı geçici elektriksel rejimler / bursts	± 2 kV, şebeke hatları için ± 1 kV, giriş ve çıkış güçleri için Bağlantı süresi ≥ 60 sn Burst frekansı: 100 kHz	± 2 kV, şebeke hatları için ± 1 kV, giriş ve çıkış güçleri için Bağlantı süresi ≥ 60 sn Burst frekansı: 100 kHz	Besleme geriliminin kalitesi tipik bir ticarethane veya hastane ortamında söz konusu olan kaliteye eş değerde olmalıdır.
IEC 61000-4-5 direktifine göre dalgalanma gerilimleri / surges	Kaynak empedansı: 2Ω, 18 µF: 0,5 kV, 1 kV Darbe gerilimlerinin adedi: 5 darbe gerilimi / faz açısı Faz açısı: 0°, 90°, 180°, 270° Tekrarlama süresi: 60 sn	Kaynak empedansı: 2Ω, 18 µF: 0,5 kV, 1 kV Darbe gerilimlerinin adedi: 5 darbe gerilimi / faz açısı Faz açısı: 0°, 90°, 180°, 270° Tekrarlama süresi: 60 sn	Besleme geriliminin kalitesi tipik bir ticarethane veya hastane ortamında söz konusu olan kaliteye eş değerde olmalıdır.

Yönergeler ve üretici beyanı - Elektromanyetik BAĞIŞIKLIK

Bu cihaz, sabit ve mobil kullanılabilen bir cihaz olarak, hem ev dahilinde hem de ilgili kliniksel alanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır.

Ev ortamındaki kullanımda cihaz parazitlenmeye neden olabilir ve bu yüzden uygun önlemler alınması gerekli olabilir, örn. cihaz yönünün ve konumunun değiştirilmesi gibi.

IEC 61000-4-11 direktifine göre gerilim beslemesinde gerilim düşmeleri, kısa süreli kesilmeler ve dalgalanmalar	Gerilim düşme adedi: 3 düşme seviyesi / süre: %30 / 500 ms %60 / 100 ms %100 / 20 ms %100 / 10 ms (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315° değerlerinde)	Gerilim düşme adedi: 3 düşme seviyesi / süre: %30 / 500 ms %60 / 100 ms %100 / 20 ms %100 / 10 ms (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315° değerlerinde)	Besleme geriliminin kalitesi tipik bir ticarethane veya hastane ortamında söz konusu olan kaliteye eş değerde olmalıdır. Eğer cihazın kullanıcı enerji beslenmesinde kesiklikler olduğunda da cihazın İŞLEVİNİN devam etmesini istiyorsa, cihazın gerilim beslemesi için bir kesintisiz akım beslemesi veya akü / pil kullanılması tavsiye edilir.
Besleme frekansındaki manyetik alan (50/60 Hz) IEC 61000-4-8 direktifine göre	30 A/m Süre: Eksen başına 30 sn Eksenler: x-ekseni, y-ekseni, z-ekseni	30 A/m Süre: Eksen başına 30 sn Eksenler: x-ekseni, y-ekseni, z-ekseni	Şebeke frekansında manyetik alanlar tipik bir ticarethane veya hastane ortamında söz konusu olan kaliteye eş değerde olmalıdır.









11.4 ME cihazları ve ME sistemleri için elektromanyetik bağışıklık

Yönergeler ve üretici beyanı - Elektromanyetik BAĞIŞIKLIK		
<p>Bu cihaz, sabit ve mobil kullanılabilen bir cihaz olarak, hem ev dahilinde hem de ilgili kliniksel alanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır.</p> <p>Ev ortamındaki kullanımda cihaz parazitlenmeye neden olabilir ve bu yüzden uygun önlemler alınması gerekli olabilir, örn. cihaz yönünün ve konumunun deęiştirilmesi gibi.</p>		
BAĞIŞIKLIK kontrolleri	IEC 60601 KONTROL SEVİYESİ	UYGUNLUK SEVİYESİ
IEC 61000-4-6 direktifine göre iletilen HF rejimi	10 V _{Etkin deęer} 150 kHz - 80 MHz, ISM bantları dâhilinde	10 V
IEC 61000-4-3 direktifine göre yayılan RF rejimleri	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 2 Hz deęerinde %80 AM	10 V/m
IEC 61000-4-8 standartına istinaden besleme frekansındaki (50/60 Hz) manyetik alan	30 A/m	30 A/m

11.5 Tanımlar, işaretler ve semboller

Aşağıdaki semboller cihaz, cihaz levhası, aksesuarlar veya ambalajları üzerine yapııştırılmış olabilir.

SEMBOL	AÇIKLAMA
	Seri numarası
	Üretim tarihi
	Kullanma talimatını dikkate alınız
	Giriş; delikler bloke edilmemelidir
	Alternatif akım
	SD kartı yuvası
	Açma-Kapatma tuşu
	Kullanma talimatına uyunuz
	Çıkış
	USB bağlantısı (seçmeli)
	Hasta valfi için valf kontrol hortumu bağlantısı
	Basınç ölçme hortumu bağlantısı (mavi olarak işaretli)
TYP:	Cihaz tipi tanımı
IP22	Bir parmak ile dokunulmasına karşı koruma derecesi. İşbu ürün, cihaz gövdesi 15° eğik konumdayken dik açılı düşen su damllarına karşı korunmuştur.

SEMBOL	AÇIKLAMA
	Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi: Koruma sınıfı II türü ürün
	Ürünü evsel atıklar üzerinden imha etmeyiniz.
	Uçaklarda kullanılmak için uygundur. RTCA/DO-160G Bölüm 21, Kategori M gereksinimlerine uygundur.
	BF tipi uygulama ünitesi
	Üretici
CE 0197	CE işareti (ürünün geçerli Avrupa Birliği direktiflerine / yönetmeliklerine uygun olduğunu onaylar)
	Taşıma ve depolama için izin verilen ısı derecesi aralığı
	Taşıma ve depolama için izin verilen hava nemi aralığı
	Tek bir hastada tekrar kullanım
MD	Ürünün bir tıbbi ürün olduğunu gösterir
UDI	Ürün tanım numarası

11.6 Teslimat kapsamı

Güncel bir teslimat kapsamı listesini üreticinin İnternet sayfasından veya yetkili satıcınız üzerinden temin edebilirsiniz.

Aşağıdaki parçalar standart olarak teslimat kapsamında mevcuttur:

PARÇA	ÜRÜN NUMARASI
Ana cihaz	Cihaza göre değişir
Kaçak hortum sistemi (prisma VENT30, prisma VENT30-C, prisma VENT40, prisma VENT40-C)	WM 23962
Tek hortumlu valf sistemi (prisma VENT50, prisma VENT50-C)	WM 27181
Elektrik bağlantı kablosu	WM 24177
O ₂ bağlantı ucu	WM 30669
Set, 12 Polen filtresi	WM 29652
Set, 2 hava filtresi	WM 29928
Taşıma çantası	WM 29710
SD kart	WM 29794
Hastalar için kullanma talimatı	LMT 68435

11.7 Aksesuarlar ve yedek parçalar

UYARI

Uyumlu olmayan aksesuar nedeniyle yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Tarif edilen solunum cihazı için tasarlanmamış aksesuarların kullanımı hastayı tehlikeye sokabilir.

⇒ Sadece tarif edilen solunum cihazı ile kullanılması öngörölmüş olan aksesuarları bağlayınız.



Aksesuarların kullanma talimatlarına dikkat ediniz. Burada kullanım ve cihaz ile kombinasyon ile ilgili ek bilgiler bulabilirsiniz.

PARÇA	ÜRÜN NUMARASI
Tek hortumlu valf sistemi (prisma VENT50, prisma VENT50-C)	WM 27181
Elektrik bağlantı kablosu	WM 24177
Hastalar için kullanma talimatı	LMT 68435
Kaçak hortum sistemi, 22 mm Ø	WM 23962
Kaçak hortum sistemi, otoklavlanabilir, 22 mm Ø	WM 24667
Tek hortumlu valf sistemi, 22 mm Ø	WM 24445

PARÇA	ÜRÜN NUMARASI
Isıtılabilir hortum sistemi HYBERNITE	WM 29067
Tek hortumlu valf sistemi, 15 mm Ø	WM 29988
Isıtılabilir hortum sistemi HYBERNITE	WM 29083
Kaçak hortum sistemi ağızlıklı solutma, 15 mm Ø	WM 27651
WILAsilent ekspirasyon valfi	WM 27589
Solunum sistemi filtresi Teleflex Iso-Gard	WM 27591
Set, 12 Polen filtresi	WM 29652
Set, 2 hava filtresi	WM 29928
prismaBAG advanced, taşıma çantası	WM 29710
Mobil kullanıma yönelik taşıma çantası	WM 30633
Set, ağızlıklı solutma	WM 27647
O ₂ bağlantı ucu	WM 30669
SD kart	WM 29794
Bağlantı kablosu, bakıcı çağırma 10 m	WM 27790
İnverter/DC/AC İnverter 12 V	WM 24616
İnverter/DC/AC İnverter 24 V	WM 24617
Set, aksesuar (yedek akü)	WM 15876
Mikro USB 2.0 bağlantı hattı 2 m, siyah	WM 35130
PSG bağlantı hattı H&L	WM 35151
PSG bağlantı hattı Weinmann	WM 35152
PSG bağlantı hattı jak, 3,5 mm Ø	WM 35153
PSG bağlantı hattı jak, 2,5 mm Ø	WM 35154
Bağlantı kablosu PSG modülü	WM 29696
Bağlantı kablosu SpO ₂ sensörü	WM 35581
SpO ₂ sensörü Boy S	WM 35532
SpO ₂ sensörü, Boy M	WM 35533
SpO ₂ sensörü, Boy L	WM 35534
2G Modem WM110MW	WM 31240
3G Modem WM110MW	WM 31770
prisma VENT için şasi NIM	WM 31365
Şasi için mafsal kolu	WM 31354
Güç kaynağı mesnedi	WM 31351
O ₂ tüpü için mesnet	WM 31352

11.8 Garanti

Löwenstein Medical Technology, yeni orijinal bir Löwenstein Medical Technology ürünü müşterisine ve Löwenstein Medical Technology tarafından monte edilmiş bir yedek parça müşterisine ilgili ürün için geçerli olan garanti koşulları kapsamında ve satın alma tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, aşağıda bildirilen garanti süreleri için sınırlı bir üretici garantisi vermektedir. Garanti koşullarını üreticinin İnternet sayfasından indirebilirsiniz. Talep etmeniz halinde garanti koşullarını size postayla da gönderebiliriz.

Bir garanti durumu söz konusu olduğunda yetkili satıcınıza başvurunuz.

ÜRÜN	GARANTİ SÜRELERİ
Aksesuarlar da dâhil olan cihazlar (istisna: Maskeler)	2 yıl
Maskeler ve aksesuarlar, aküler, piller (teknik dokümanlarda farklı bir şey belirtilmemesi halinde), sensörler, hortum sistemleri	6 ay
Tek kullanımlık ürünler	Yok

11.9 Uygunluk beyanı

İşbu yazı ile, üretici konumundaki Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG, Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg, Almanya, firması bu ürünün, tıbbi ürün yönetmeliği (AB) 2017/745 direktifinin geçerli hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tam metnini üreticinin İnternet sayfasından tedarik edebilirsiniz.

LMT 68435 09/2021 TR

CE 0197

**Löwenstein Medical
Technology GmbH + Co. KG**
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Germany
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
www.loewensteinmedical.com



LMT 68435

LÖWENSTEIN
medical